


**МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
UNIX MED SECRET POUF GREY****ВАЖНО**

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

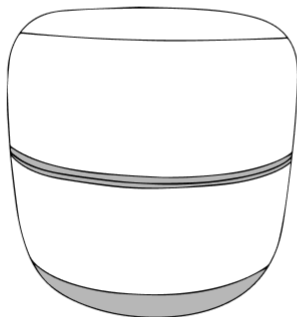

Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Med**!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукте нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Med** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием продукта! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.


UNIX Med заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярный массаж способствует улучшению вашего физического и ментального состояния, а также влияет на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Med** вы можете быть уверены в своем выборе на долгие годы.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все товары бренда **UNIX Med** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

● КОМПЛЕКТАЦИЯ

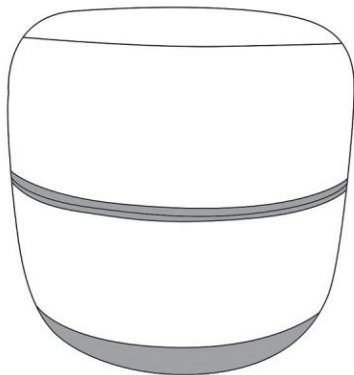

Массажер

Верхняя и нижняя
крышки



Зарядное устройство




Инструкция по эксплуатации



Гайки и болты M5


● НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

ВНЕШНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

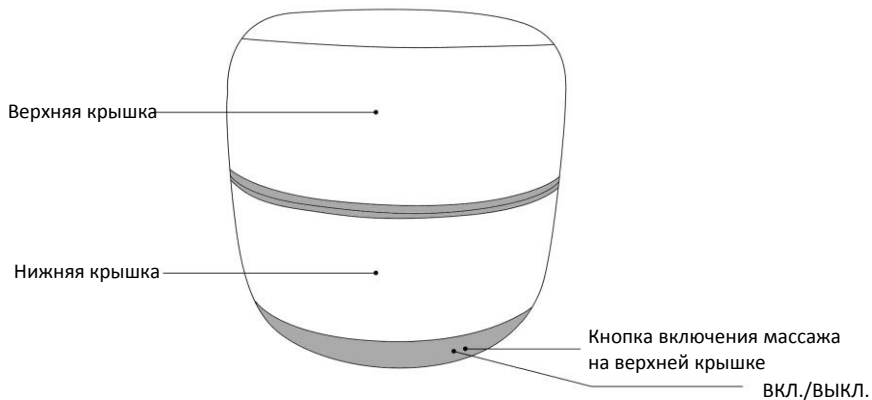

● НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ


ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

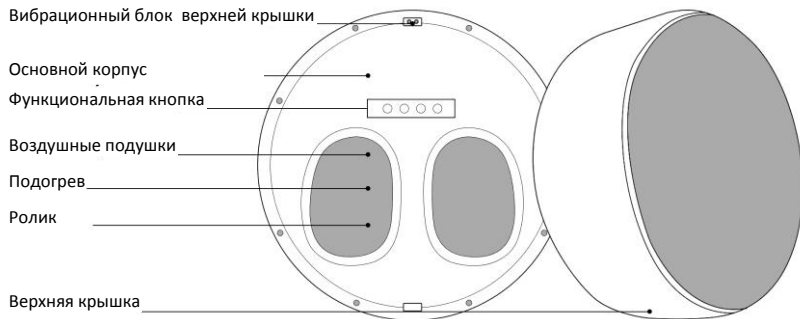

● ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕСТО УСТАНОВКИ

- Во избежание образования помех прибор следует установить на расстоянии не менее 1 м от радио-, видео- и аудиоустройств.

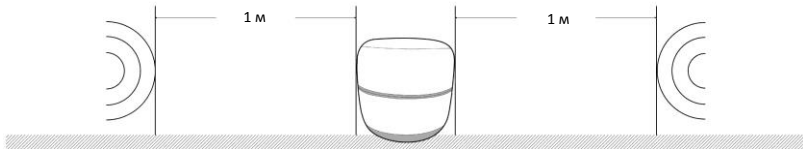

ВНИМАНИЕ

- Перед зарядкой следует выпрямить провод адаптера во избежание его запутывания и повреждения
- Длительность зарядки не должна превышать 3 часов
- Запрещается использовать для зарядки неоригинальный адаптер

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током изделие должно быть заземлено.
- Запрещается устанавливать массажер на неровных поверхностях

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Массажер для ног следует использовать вдали от влажных помещений (например, ванной комнаты) во избежание поражения электрическим током
- Массажер для ног следует использовать вдали от источников высоких температур (например, кухонной плиты) во избежание повреждения кожи или возгорания



● РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед сном



После работ по дому



После тренировки



Во время использования маски для лица



● УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССАЖЕРА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- При достаточном уровне заряда литиевого аккумулятора подключать адаптер для использования не требуется. Если уровень заряда низкий, необходимо подключить адаптер для зарядки



Использование верхней части корпуса


- При закрытой верхней крышке для массажа может использоваться подушка на верхней крышке

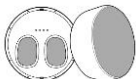

Массажер для ног

- Открыв верхнюю крышку, вы можете использовать массажер для ног

● УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ

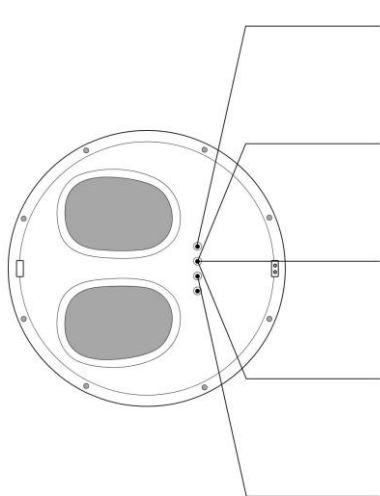

ВКЛ./ВЫКЛ.

- Включение/отключение массажера для ног; красный светодиод обозначает низкий заряд батареи



Кнопка выбора программы

- При нажатии на кнопку выбора программы можно изменить режим массажа: если загорается зеленый светодиод, выбран режим вибрационного массажа воздушным роликом



Кнопка выбора программы

- При нажатии на кнопку выбора программы можно изменить режим массажа: если загорается желтый светодиод, выбран режим массажа воздушным роликом



Кнопка выбора программы


- При нажатии на кнопку выбора программы можно изменить режим массажа: если загорается красный светодиод, выбран режим вибрационного массажа



Кнопка подогрева

- Включение/выключение функции подогрева

● УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ

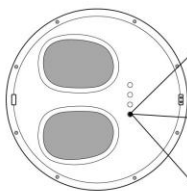

ИНТЕНСИВНОСТЬ

- Кнопка изменения интенсивности массажа. Зеленый светодиод означает наименьшую интенсивность массажа



ИНТЕНСИВНОСТЬ

- Кнопка изменения интенсивности массажа. Желтый светодиод означает среднюю интенсивность массажа



ИНТЕНСИВНОСТЬ


- Красный светодиод означает наибольшую интенсивность массажа



Кнопка включения массажа на верхней крышке

- При нажатии кнопки включается массаж с помощью верхней крышки прибора

● ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

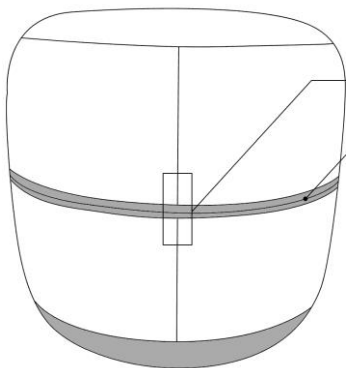

Внимание

- Совместить верхнюю крышку с основным корпусом прибора
- Убедиться, что крышка полностью закрывает основание двигателя
- Если верхняя и нижняя крышки закрыты не полностью, прибор и покрытие его корпуса могут быть повреждены

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности для обеспечения правильной работы

КОНТРОЛЛЕР

- Не прикасайтесь мокрыми руками к контроллеру или кабелю контроллера
- Не проливайте воду на контроллер во избежание поломки
- Не помещайте тяжелые предметы на контроллер

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Не используйте адаптеры сторонних производителей во избежание возгорания или повреждения изделия
- Время зарядки через адаптер не должно превышать 3 ч
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте адаптер мокрыми руками
- При отключении адаптера от розетки следует держать за адаптер, а не за провод
- Не ставьте прибор или другие тяжелые предметы на провод адаптера
- Запрещается изгибать, тянуть, перекручивать и завязывать провод адаптера во избежание его повреждения
- При повреждении провода адаптера запрещается самостоятельно разбирать или заменять его.
- Для замены и ремонта обращайтесь к квалифицированному специалисту

Среда использования

- Запрещается использовать при температуре выше 40 °C

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Среда

использования

- Не использовать при температуре ниже 0 °C
- Не использовать во влажных или запыленных помещениях во избежание поражения электрическим током или неисправности
- Не использовать во время грозы; в этих случаях следует вынимать его вилку от розетки
- Не устанавливать на неровных поверхностях
- Не устанавливать вблизи нагревательных приборов или в местах, где на него падает прямой солнечный свет

Запрещено

Разборка

- Запрещается самостоятельно разбирать внутренние компоненты данного изделия во избежание его поломки
- Разборка, ремонт или модификация аппарата могут выполняться только специалистами по ремонту, рекомендованными нашей компанией. При возникновении каких-либо вопросов своевременно обращайтесь к продавцу

Отключение от сети

- Перед обслуживанием следует вынимать штепсель из розетки. Запрещается прикасаться к штепселю мокрыми руками во избежание поражения электрическим током и травмирования
- Следует вынуть штепсель из розетки после окончания использования или когда аппарат не используется.
- В случае сбоя электропитания немедленно нажмите выключатель питания и отключите прибор от розетки

Внимание!

- Изделие рассчитано на массу тела не более 265 фунтов (120 кг).

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

- Запрещается использовать другие терапевтические устройства одновременно с данным массажером
- Использование данного аппарата допускается только одним человеком. Использование двумя или более людьми одновременно запрещено
- Перед использованием аппарата следует снимать с ног все украшения
- Перед использованием проверьте, что все контактирующие с телом детали не имеют повреждений. При наличии каких-либо повреждений следует немедленно прекратить использование массажера и обратиться к специалистам для выполнения ремонта.
- При возникновении каких-либо недомоганий во время массажа немедленно остановите прибор и обратитесь к врачу

ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется использовать данное изделие не более 10 минут подряд.
- Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии вблизи него каких-либо животных или предметов
- Если изделие не используется в течение длительного времени, заряжайте его ежемесячно во избежание повреждения батареи
- Во избежание травмирования или поломки запрещается становиться на массажер
- Запрещается толкать или тянуть прибор на полах и напольных покрытиях, которые могут быть легко повреждены
- Данный прибор следует хранить в хорошо проветриваемом помещении и в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не рекомендуется для использования следующими людьми:

- Пациенты с тяжелым гиперостозом
- Пациенты с опухолями и тромбозами
- Пациенты с серьезными заболеваниями сердца

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Беременные
- Лица в состоянии алкогольного опьянения
- Лица с сахарным диабетом
- Больные с высокой температурой
- Пациенты с злокачественными опухолями или абсцессами
- Пациенты с травмами суставов

● УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы/неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Звуки ударов или гул при работе	Нормальный звук работы двигателя или трения между массажным роликом и одеждой	Нормальное явление
Прибор не включается	Батарея разряжена	Зарядить батарею

Если неисправности вызваны иными причинами, отключите электропитание и обратитесь к продавцу. Примечание: запрещается разбирать прибор самостоятельно. Наша компания не несет какой-либо ответственности за повреждения изделия или травмирование людей в результате ненадлежащего использования. Благодарим вас за содействие.

● Напоминание

Проверяйте наличие следующих признаков при регулярном использовании:

- запах гари;
- неправильные параметры электропитания;
- перегрев кабеля питания;
- прочие нештатные явления.
- Если наблюдаются вышеперечисленные явления, во избежание возникновения неисправностей и несчастных случаев прекратите использование массажера: нажмите выключатель питания, выньте кабель из розетки и свяжитесь с продавцом.

● ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Массажер для ног	Номинальное напряжение Номинальная частота	110–220 В 50/60 Гц
Размер упаковки	455×455×455 мм	Номинальная мощность	48 Вт
Возможные цвета	Серый/розовый/синий	Шум	≤55 дБ
МАССА БРУТТО	12 кг	Класс безопасности конструкции	Класс I
Масса нетто	9.96 кг	Максимальный вес	120 кг