



**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **МАССАЖНАЯ ПОДУШКА UNIX MED RELAX PILLOW GREY**



**ВАЖНО**

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



## Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Med!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукте нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Med** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием продукта! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

**UNIX Med** заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярный массаж способствует улучшению вашего физического и ментального состояния, а также влияет на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Med** вы можете быть уверены в своем выборе на долгие годы.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все товары бренда **UNIX Med** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



[UNIXFIT.RU](http://UNIXFIT.RU)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Массажная подушка UNIX Med Relax Pillow

Номинальное напряжение: 12,6 В постоянного тока

Номинальная мощность: 24 Вт (в том числе 5 Вт на нагрев)

Время работы: 10 минут

Размер: 45×25×9 см

Масса нетто: 1,5 кг

Комплектация: зарядное устройство, руководство пользователя




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если зарядное устройство повреждено и требует замены, для обеспечения безопасности использования необходимо заменить его на аналогичное (напряжением 12,6 В постоянного тока).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного документа, включая в том числе технические характеристики и описания изделия, в любой момент без предварительного уведомления.

# МАССАЖНАЯ ПОДУШКА UNIX MED RELAX PILLOW

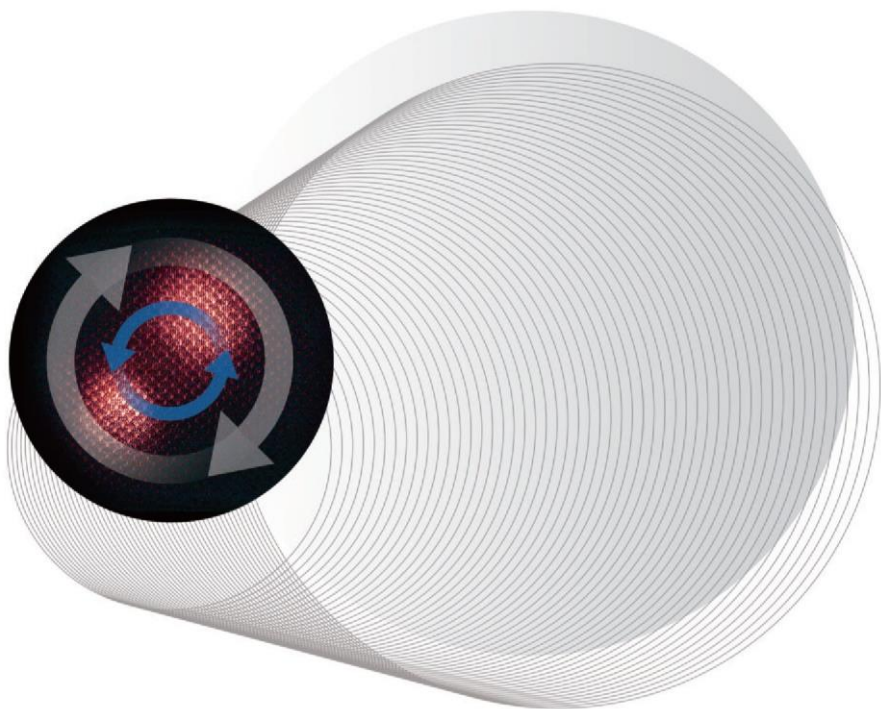

Перед использованием внимательно  
ознакомьтесь с данным руководством

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие разработано для удобства при использовании. Уникальная конструкция из четырех роликов с подогревом предназначена для массажа необходимых зон тела. Беспроводной массажер имеет мягкую поверхность с одной стороны и расслабляющую массажную головку с другой.

Массажер изготовлен из долговечного и износостойкого материала и имеет удобную кнопку включения на боковой поверхности.



Зарядное устройство

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Рекомендуемое применение

- Рекомендуется выполнять массаж в течение не более 15-20 минут для постепенного привыкания организма с последующим увеличением длительности при необходимости, а также для продления срока службы подушки массажера.
- Если интенсивность работы массажного шарика кажется слишком высокой, для ее уменьшения можно положить полотенце или одеяло между телом и шариком.

### Зарядное устройство

- После полной зарядки необходимо вытащить штекер из разъема, при этом следует взяться за штекер, а не тянуть провод.

### Место использования

- Запрещается использовать массажер в запыленных, грязных, влажных или задымленных условиях.
- Запрещается помещать прибор вблизи паровых шкафов, открытого пламени или нагревательных приборов.
- Запрещается помещать прибор в местах, где на него будет падать прямой солнечный свет.
- Запрещается использовать прибор в условиях повышенной влажности (бассейн, ванная комната).
- Запрещается использовать массажер на открытом воздухе.
- Запрещается использовать прибор в задымленном помещении или в условиях недостатка кислорода.

### Пользователи

- При наличии каких-либо травм проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Данный массажер не предназначен для детей.
- Если у вас длинные волосы, избегайте их попадания между телом и массажером.
- Не оставляйте работающий массажер без присмотра.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР

- При зарядке индикатор заряда горит красным светом.
- После подключения зарядного устройства дождитесь полной зарядки массажера.
- При полной зарядке индикатор заряда горит зеленым светом.
- Для запуска массажера нажмите и удерживайте кнопку включения в течение трех секунд.  
Нажмите на нее еще раз, чтобы включить/отключить функцию подогрева.
- Нажмите и удерживайте переключатель направления для включения первого режима массажа.
- Нажмите на него еще один раз для включения второго режима массажа.
- При нормальном использовании массажер автоматически прекращает работу через 10 минут после включения, если вы хотите продолжить использование, снова нажмите и удерживайте включатель в течение 3 секунд.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Возможная причина	Метод устранения
Звуки ударов или гул при работе	Нормальное явление	Нормальное явление
Шум при выполнении массажа	Если продолжается в течение 30 минут	Отключить прибор и подождать 1 час
Высокая температура поверхности или длительное остывание	Перегрев	Отключить массажер и дать ему остыть