


МАССАЖНОЕ КРЕСЛО UNIX MED AMELIA BEIGE

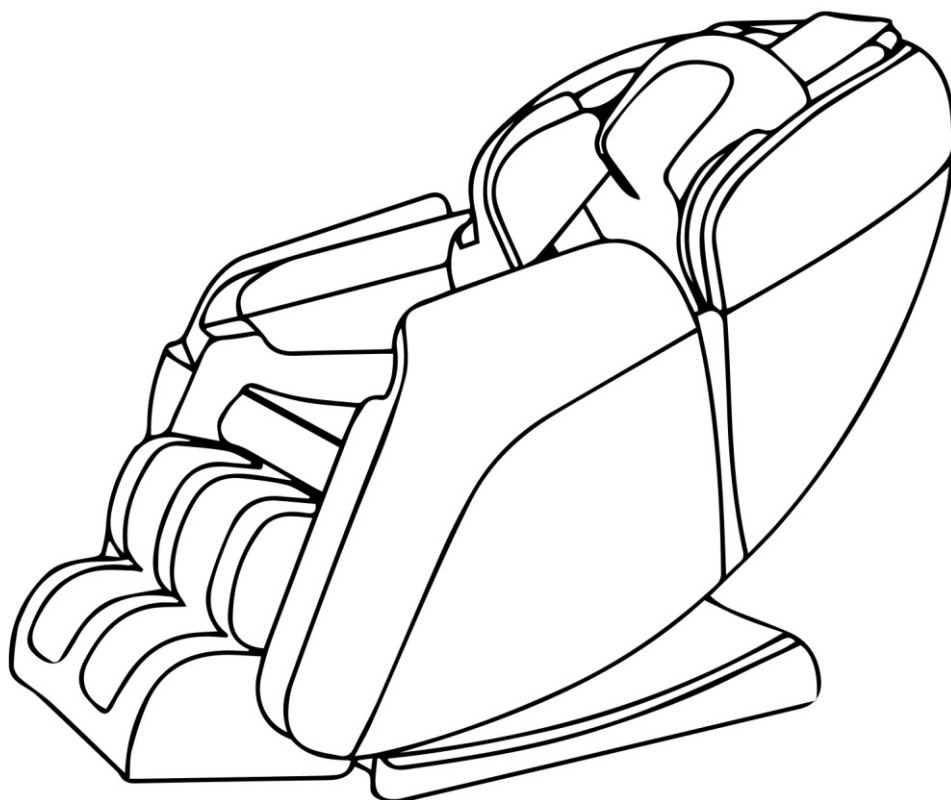

ВАЖНО

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Благодарим вас за покупку массажного кресла. Перед использованием массажного кресла ознакомьтесь с содержанием данного руководства по эксплуатации и обращайтесь к нему при необходимости.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и обслуживание.....	1
Функции и преимущества.....	2
Схема устройства.....	3
Инструкция по сборке.....	4
Инструкция по использованию.....	5
Устранение неполадок.....	7
Технические характеристики.....	9

Меры предосторожности

- Не используйте изделие с неподходящим напряжением.
- Обязательно используйте вилку с соответствующей розеткой.
- Используйте изделие в соответствии с руководством по эксплуатации; пожалуйста, не используйте устройство на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, дефектами органов чувств и нервной системы или отсутствием здравого смысла и жизненного опыта (включая детей). Не разрешайте детям играть с изделием или вблизи него, не оставляйте детей без присмотра рядом с изделием.
- Если кабель питания поврежден, во избежание поломок и травм его замену должен производить профессиональный специалист компании-производителя, отдела технического обслуживания или аналогичного структурного подразделения.

Замечания по безопасности

- Убедитесь, что входное напряжение соответствует техническим характеристикам изделия.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Никогда не используйте влажную ткань для чистки выключателя питания, вилки и других частей изделия, находящихся под напряжением.
- Если в процессе использования вы обнаружите, что кресло работает ненормально, немедленно прекратите его использование и обратитесь за консультацией к компании-продавцу.

Данный прибор не может использоваться следующими категориями лиц:

- Пациенты с остеопорозом; с проблемами сердца, а также те, кто носит электронные медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы;
- Беременные или менструирующие женщины;
- Люди, получившие физическую травму или повреждения кожи.
- Лица, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании прибора.
- Лица, имеющие противопоказания врача в силу физической нестабильности и плохого самочувствия

Внешние условия

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не используйте изделие в условиях резко меняющейся температуры.

Обслуживание устройства

- Данное изделие может подлежать ремонту только в сервисном центре, указанном производителем; пользователи не должны самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.
- Пожалуйста, выключайте питание каждый раз после использования.
- Сматывайте шнур питания прибора, если он не используется в течение длительного времени, и храните его в сухом и чистом месте.
- Не храните изделие при высокой температуре или вблизи огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Для очистки используйте сухую ткань, не используйте растворители, бензин или спирт.
- Не допускайте длительной работы изделия без перерыва. Периодически останавливайте прибор и оставляйте его выключенным на некоторое время.


Основные функции

- L-образная форма позволяет массировать шею, плечи, спину, талию и другие части тела.
- Восемь нажимных массажных головок на спине
- Четыре автоматических режима массажа: Освежающий, Энергетический, Сон и SPA массаж.
- Воздушные подушки для массажа плеч, рук, икр и ступней.
- Постоянный подогрев области спины.
- Полуавтоматический режим работы.
- Роликовый массаж ног.
- Встроенный Bluetooth-адаптер для прослушивания музыки.

Преимущества

- Снимает общую усталость.
- Способствует циркуляции крови.
- Снимает мышечное напряжение.
- Облегчает мышечную боль.


Схема устройства

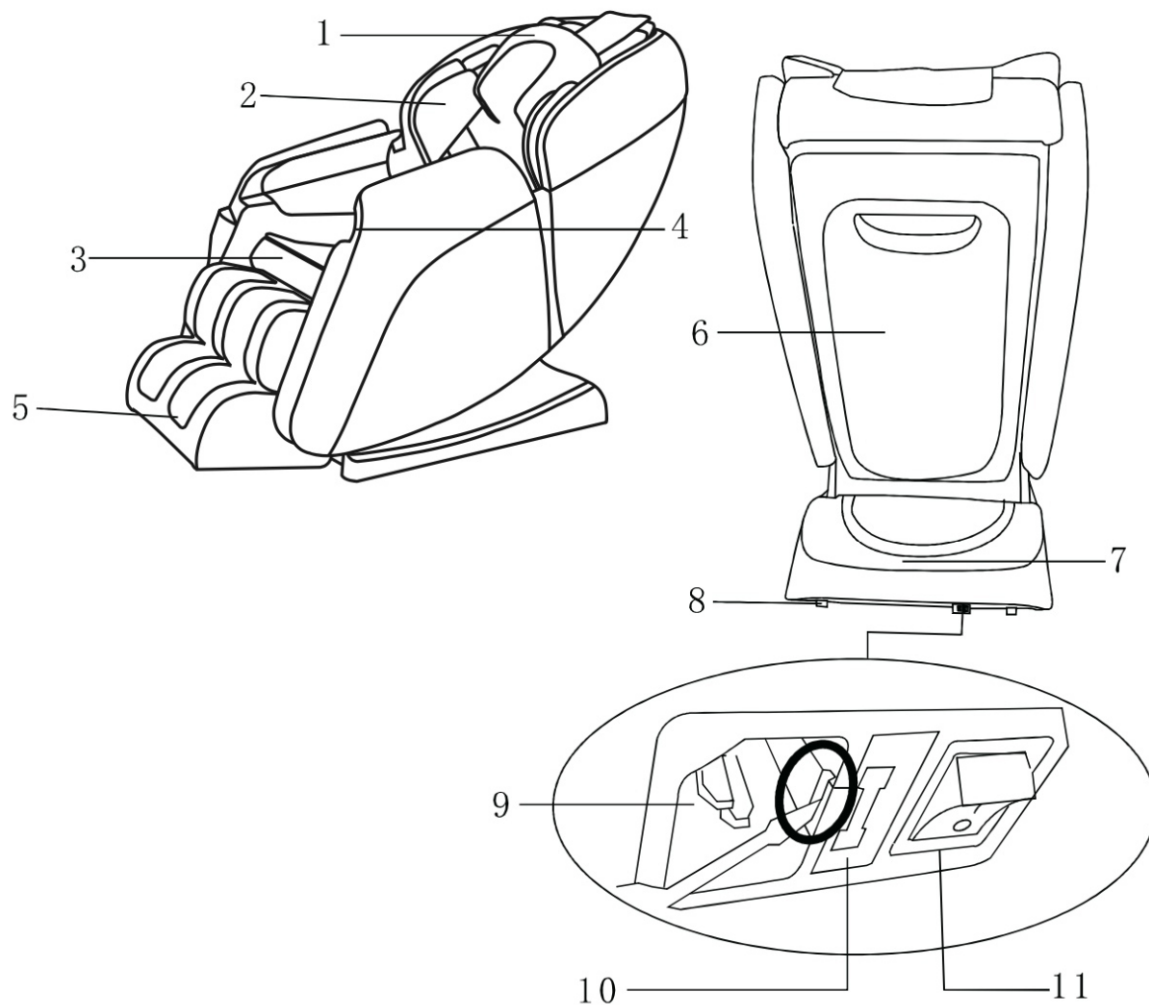


1. Подголовник
2. Плечевая подушка
3. Сиденье
4. Подлокотник
5. Подставка для ног
6. Спинка
7. Крышка платы управления
8. Валики
9. Разъем питания
10. Предохранитель
11. Выключатель питания

Инструкция по сборке

Если кресло не проходит через дверной проем, снимите боковую панель.

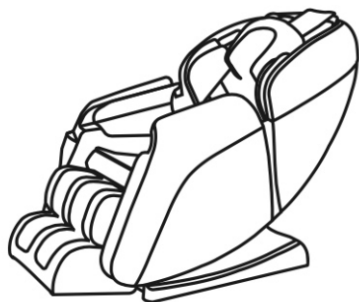


1. Открутите винт с внутренним шестигранником
2. Вытащите разъем динамика

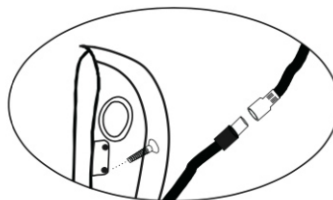

Установка и снятие подлокотников

Если массажное кресло не удастся занести в комнату из-за недостаточно широкого дверного проема, необходимо демонтировать подлокотник и занести его отдельно.

- Соедините воздуховоды одного цвета, как показано на рисунке 1.
- Наденьте желобки, как показано на рисунке 2, чтобы избежать искривления воздуховодов.
- Затяните с помощью отвертки, как показано на рисунке 3.

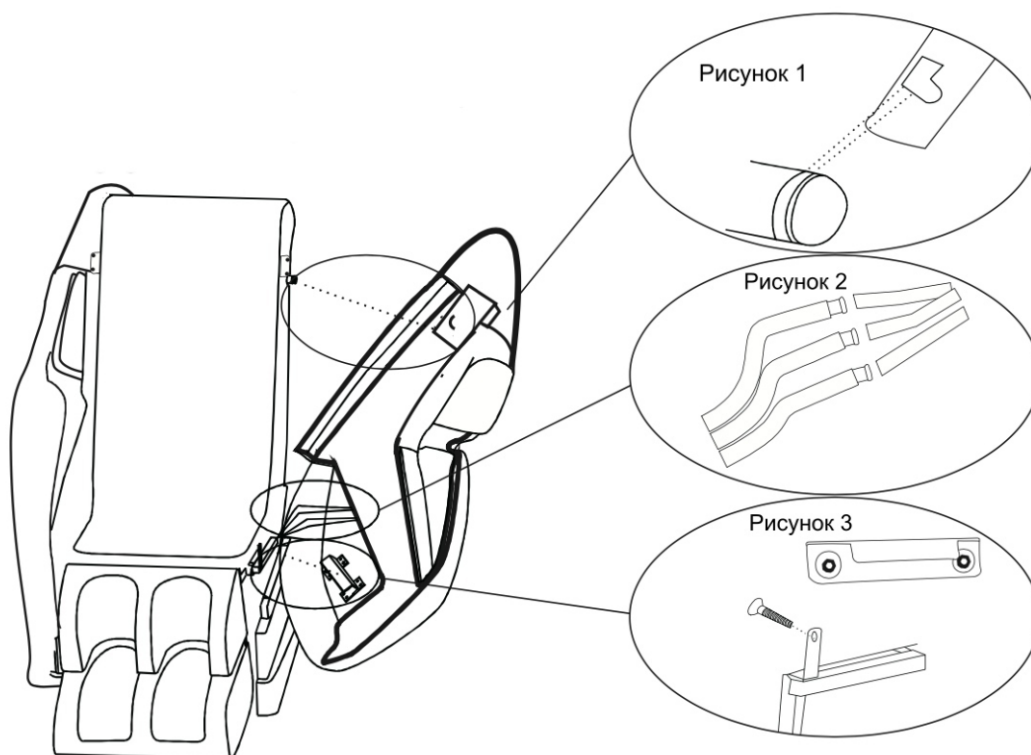

Перемещение массажного кресла


Наклоните массажное кресло назад примерно на 45°, используя колесики для движения вперед или назад.

Важно!

- Не передвигайте массажное кресло, когда на нем кто-то сидит.
- Во избежание повреждения напольного покрытия при перемещении массажного кресла лучше подложить под него защитный коврик.
- Во время перемещения кресла крепко держите его, чтобы не уронить.

Размещение массажного кресла

При размещении массажного кресла оставьте вокруг достаточно места, чтобы ноги и спина пользователя могли свободно двигаться вверх и вниз. Соответствующее пространство схематично изображено на рисунке ниже.

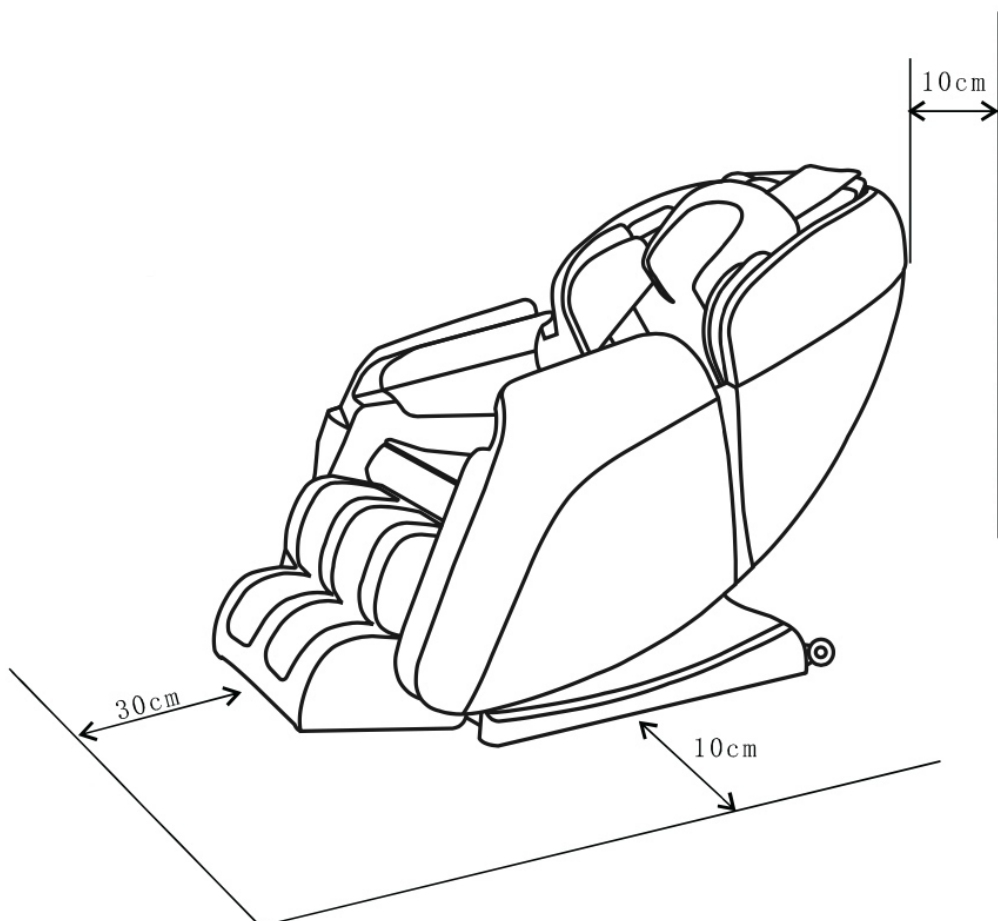


Инструкция по использованию

Функции кнопок:

Режим разминания
Режим Шиаци
Силовой режим
Расслабление мышц
Режим "Перед сном"

Автоматический аэромассаж
Аэромассаж плеч/головы
Аэромассаж рук
Аэромассаж ног
Интенсивность

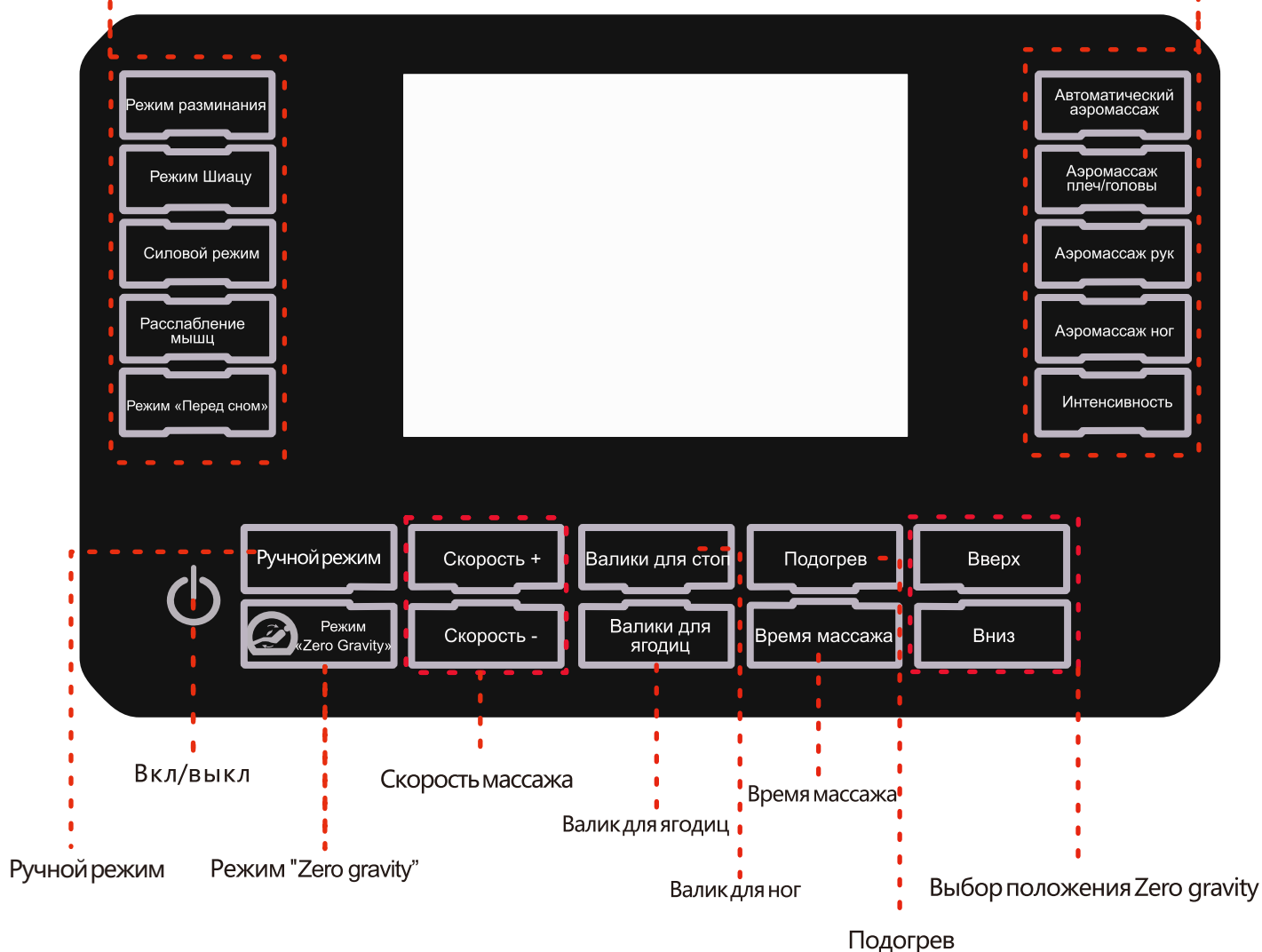

Включение/выключение

Найдите подходящую электрическую розетку (см. стр. 4) и подключите прибор к сети. Далее переведите переключатель в положение "I". Если индикатор загорится, это означает, что прибор подключен к сети.

Начало работы

Кнопка режима ожидания: Нажмите кнопку "⏻", чтобы включить/выключить функцию массажа всеми элементами кресла.

Когда питание включено, нажмите эту кнопку, чтобы перевести кресло в исходное положение. После этого по умолчанию будет запущена первая автоматическая программа "Релакс-массаж". Время работы по умолчанию составляет 15 минут. Нажмите эту кнопку еще раз и подождите еще 20 секунд для отмены запуска программы.

Автоматический режим

Автоматическая программа массажа: В зависимости от состояния вашего тела и времени массажа, вы можете выбрать "Режим разминания", "Режим Шиаци", "Силовой режим", "Режим расслабления мышц" и "Режим "Перед сном", каждый из которых представляет собой самостоятельную программу для целенаправленного массажа. (Подробное описание см. на экране компьютера).

Аэромассаж

Автоматический аэромассаж: Нажмите кнопку "Авто аэромассаж", чтобы включить или выключить программу автоматического аэромассажа.

Аэромассаж плеч и головы: Нажмите кнопку "Аэромассаж Плеч/Головы", чтобы включить или выключить программу аэромассажа плеч и головы.

Аэромассаж рук: Нажмите кнопку "Аэромассаж Рук", чтобы включить или выключить программу аэромассажа рук.

Аэромассаж ног: Нажмите кнопку "Аэромассаж Ног", чтобы включить или выключить программу аэромассажа ног.

Регулировка интенсивности: Нажмите кнопку "Сила аэромассажа" для регулировки интенсивности поступающего воздуха.

Ручной режим

Активация режима: Нажмите кнопку "Ручной режим", чтобы выбрать один из 3 программ массажа.

Регулировка скорости: Нажмите кнопку "Скорость+", чтобы увеличить скорость массажа, и "Скорость-", чтобы уменьшить скорость массажа.

Другое

Подогрев: Нажмите кнопку "Подогрев", чтобы включить или выключить функцию подогрева поясницы.

Валик для ног: Нажмите кнопку "Валик для ног", чтобы включить или выключить валик для ног.

Валик для ягодиц: Нажмите кнопку "Валик для ягодиц", чтобы включить или выключить валик для ягодиц.

Установка времени: Нажмите кнопку "Время", чтобы выбрать время массажа (15/20/25/30 минут).

Режим Zero gravity: Нажмите кнопку "Zero Gravity" для включения/выключения режима. Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх", чтобы поднять спинку кресла. Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз", чтобы опустить спинку.

Устранение неполадок

- Если при подключении к розетке массажное кресло не работает, проверьте, хорошо ли подключена вилка и включено ли питание.
- Если питание включено, но массажное кресло не работает, замените предохранитель (см. страницу 5 данной инструкции).
- Если массажное кресло внезапно перестало работать, возможно, закончилось время массажа, или вы случайно нажали кнопку выключения.
- При работе массажного кресла возникает шум мотора, и это вполне нормально.
- Если время истекло и массажное кресло перестало работать, нажмите кнопку включения/выключения, и оно запустится снова.
- Если индикатор питания мигает, но массажное кресло не включается, проверьте, исправна ли кнопка включения или в порядке ли гнездо пульта управления.
- Если во время массажа вы обнаружили неполадки, немедленно выключите питание. Не возобновляйте использование устройства до устранения проблем.

Важные замечания:

- При возникновении проблем в ходе использования массажного кресла попробуйте найти решение в данном руководстве. Если проблема трудноразрешима, отключите питание, выньте вилку из розетки и обратитесь за советом к продавцу или производителю.
- Никогда не разбирайте и не обслуживайте массажное кресло самостоятельно. Если массажное кресло будет повреждено в результате самостоятельного демонтажа или ремонта, гарантия будет аннулирована.

Технические характеристики

Название	Массажное кресло UNIX Med
Модель	Amelia
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100Вт
Стандарт безопасности	Класс I
Номинальное время работы	20 мин

**Отдыхайте
вместе с**

