



БЕСПРОВОДНОЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЁР RELAX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема Unix

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

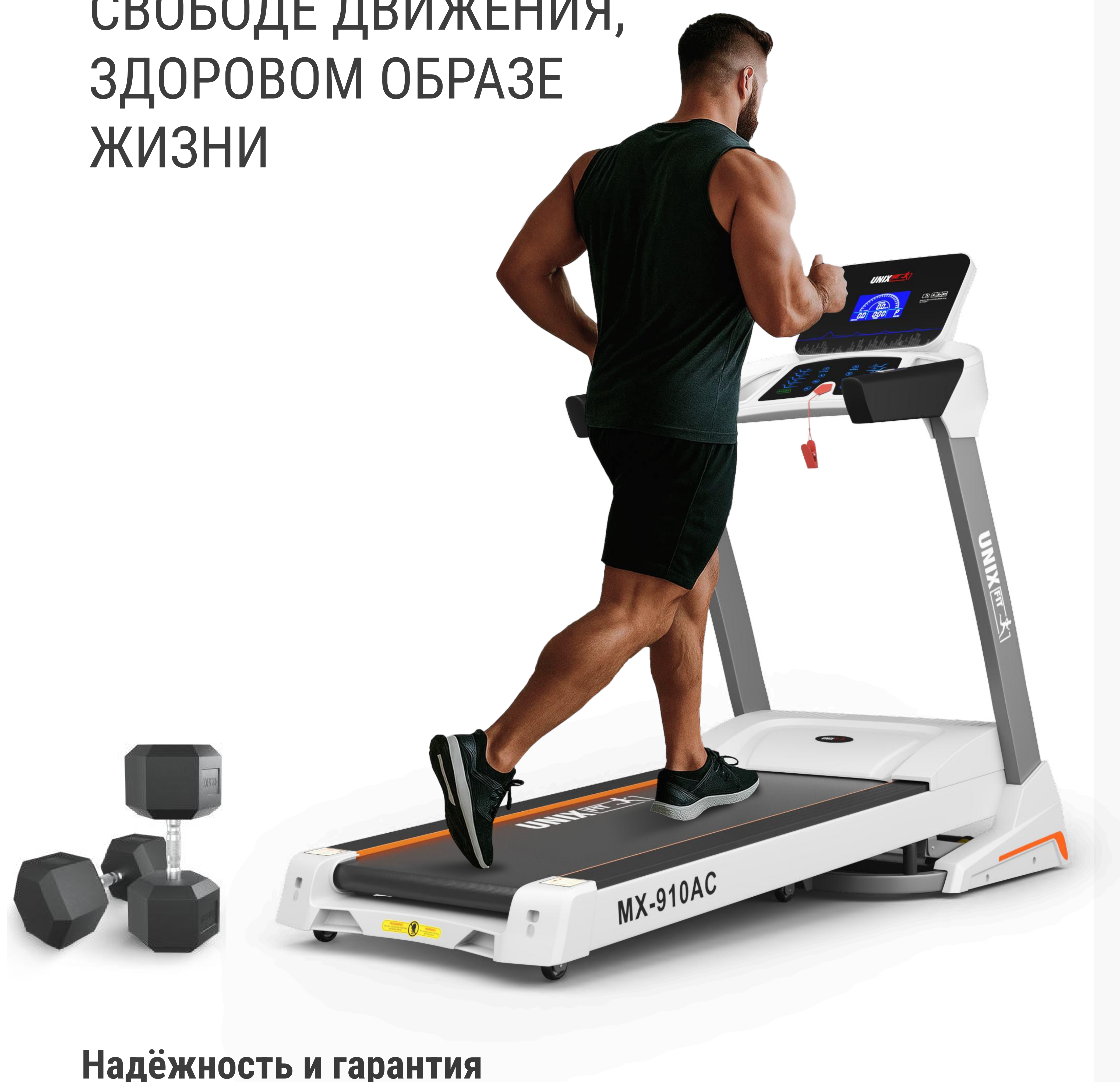

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.



Рады приветствовать вас!


Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу **unixfit.ru**

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX FIT** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.

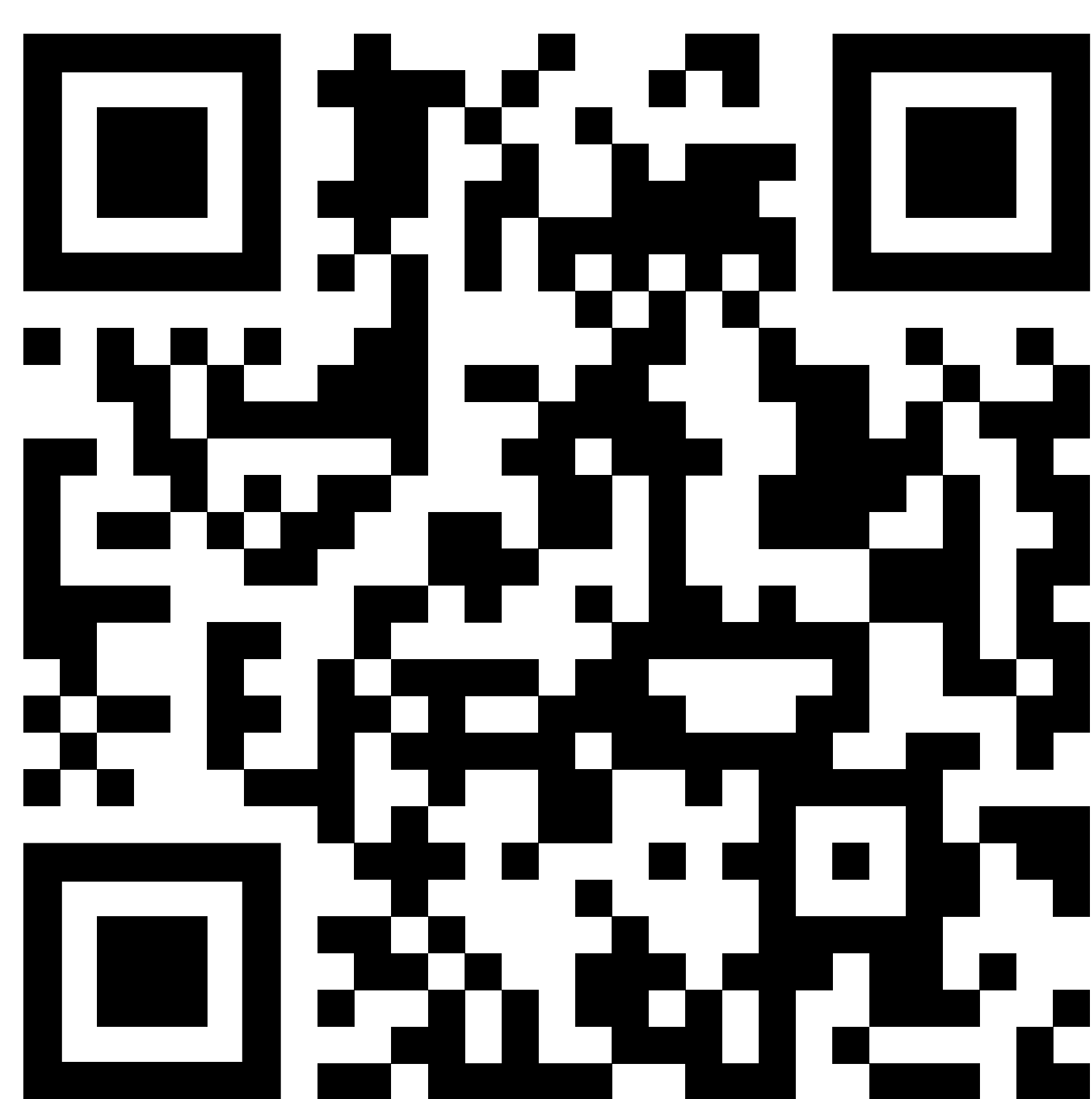

UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Рекомендации по использованию массажной подушки

ВНИМАНИЕ!

Перед началом массажного воздействия рекомендуем пройти медицинское обследование и получить консультацию врача по режимам и интенсивности проведения массажа.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Наличие имплантированных электронных устройств, кардиостимуляторов.
- Прохождение курса лечения при плохом самочувствии.
- Наличие злокачественных опухолей, острых заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, тяжелой формы гипертонической болезни и пр.
- Беременность или период менструации.
- Наличие остеопороза и переломов позвоночника.
- Наличие повреждений кожи, требующих состояния покоя.
- Температура тела выше 38 градусов (лихорадочное состояние).
- Наличие нарушений чувствительности к теплу.
- Использование массажёра людьми с психическими заболеваниями или детьми требует контроля со стороны дееспособных лиц.

При наличии вышеперечисленных симптомов проконсультируйтесь с врачом по поводу проведения массажа или используйте устройство в присутствии врача.

Техника безопасности при использовании беспроводного роликового массажёра

ВАЖНО!

Перед использованием прочтите данное Руководство.

- Прежде чем использовать роликовый массажёр-подушку, убедитесь, что массажёр находится в правильном положении.
- Не подпускайте детей к устройству во время использования. Не позволяйте детям залезать на устройство и играть на нём даже, когда оно не работает.
- Перед зарядкой батареи массажной подушки нужно растянуть кабель питания во избежание его запутывания или заземления и повреждения.
- Длительная непрерывная работа и перегрузка устройства могут привести к повреждению. Контролируйте время работы массажного устройства. Рекомендуется использовать данное изделие не более 60 минут подряд.
- Перед началом сеанса массажа тщательно осмотрите массажёр и его элементы на наличие повреждений. При обнаружении повреждений использовать устройство запрещается!
- Не рекомендуется проводить массаж сразу после еды.
- Не допускается использование устройства двумя и более человек одновременно.
- При повреждении массажёра не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно.
- При обнаружении дефектных деталей незамедлительно организуйте их замену. Не используйте устройство до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается использовать другие терапевтические устройства одновременно с применением данного устройства.
- При возникновении каких-либо неприятных ощущений в организме следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.
- Во время массажа ролики для разминания должны располагаться по бокам от позвоночника, иначе воздействие на кость может вызвать болевые ощущения.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Роликовый массажёр не является медицинским изделием и не заменяет лекарственных средств.

ХРАНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ


- Устройство предназначено для домашнего использования, его не следует устанавливать в общественных местах или использовать в коммерческих целях.
- Массажёр предназначен для использования и хранения в помещении. Не рекомендуется установка и хранение устройства на улице, во влажных и холодных помещениях, включая ванные комнаты или необорудованные подвальные пространства.
- Не рекомендуется размещать устройство под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных приборов. Перегрев массажёра может привести к перегрузке и выходу оборудования из строя. Не используйте изделие в помещениях с температурой выше 40 °C.
- Избегайте попадания воды и других жидкостей на устройство. Это может вызвать повреждение устройства и выходу его из строя.
- Не забывайте регулярно осматривать массажёр на предмет повреждений и вовремя обслуживать устройство.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Зарядное устройство для роликового массажёра представляет собой шнур USB Type-C.
- Перед использованием устройства полностью и плотно вставляйте шнур разъёмом Type-C в массажёр, а разъёмом USB в блок питания (приобретается отдельно) и далее вилку блока питания в розетку электросети.
- При наличии у вас сомнений относительно состояния электрооборудования для подключения вашего устройства, обратитесь к специалисту-электрику.
- Не используйте устройство, если кабель питания, вилка или розетка повреждены. Работа устройства в таком случае может привести к электротравме, поражению электрическим током, перегрузке и возгоранию.
- Не повреждайте или не сгибайте кабель питания, не пережимайте провод и не размещайте на нём тяжелые предметы.
- Не подключайте зарядное устройство к розеткам, расположенным в непосредственной близости от металлических поверхностей, скоплений мусора или источника воды. Не прикасайтесь к проводу, вилке или розетке влажными руками!
- В случае обнаружения повреждений кабеля питания, обратитесь в сервисный центр. Не занимайтесь устранением поломки самостоятельно.
- Если зарядное устройство повреждено и требует замены, для обеспечения безопасности использования необходимо подобрать аналог с напряжением 12,6 В постоянного тока.

После завершения сеанса массажа выключайте устройство.

Общие положения и описание устройства

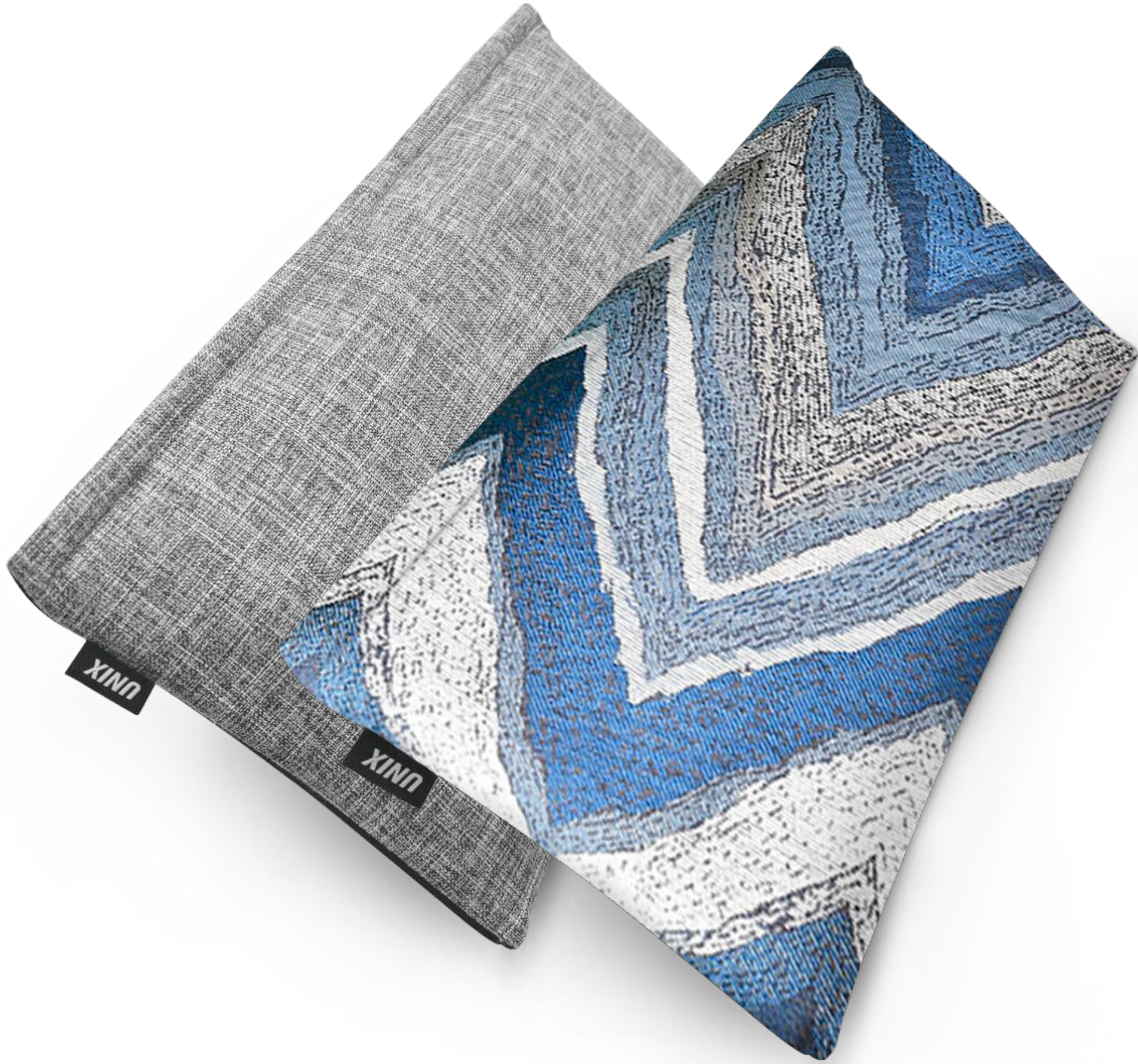

Беспроводной роликовый массажёр предназначен для проведения массажа спины и суставов в домашних условиях или в офисе.

Для проведения массажа устройство следует размещать в области массируемого отдела позвоночника или сустава. Время воздействия на каждый сегмент опорно-двигательного аппарата не должно превышать 15 минут.

Массаж производится с помощью роликов, встроенных в конструкцию массажёра. Устройство обеспечивает движение роликов по или против часовой стрелки. Переключение направления движения проводится отдельной кнопкой.

Дополнительное положительное воздействие оказывает функция инфракрасного подогрева, которую обеспечивает устройство. При необходимости подогрев можно отключить.


Устройство управляется кнопками, размещёнными на боковой части подушки. Рекомендуется выполнять массаж в течение не более 15-20 минут для постепенного привыкания организма с последующим увеличением длительности.

Обратите внимание, что устройство настроено на автоотключение по прошествии 10 минут. При необходимости продолжать массаж подушку надо включить заново. Если интенсивность работы роликов кажется слишком высокой, то для её уменьшения можно между телом и массажёром положить полотенце или одеяло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	Беспроводной роликовый массажёр UNIX Med Relax Pillow
Номинальное напряжение	12,6 В постоянного тока
Номинальная мощность	24 Вт (в том числе 5 Вт на функцию подогрева)
Время работы до автоматического отключения	10 минут
Размер	45 × 25 × 9 см
Масса нетто	1,5 кг
Комплектация	Массажёр, зарядное устройство, руководство пользователя

Инструкция по управлению

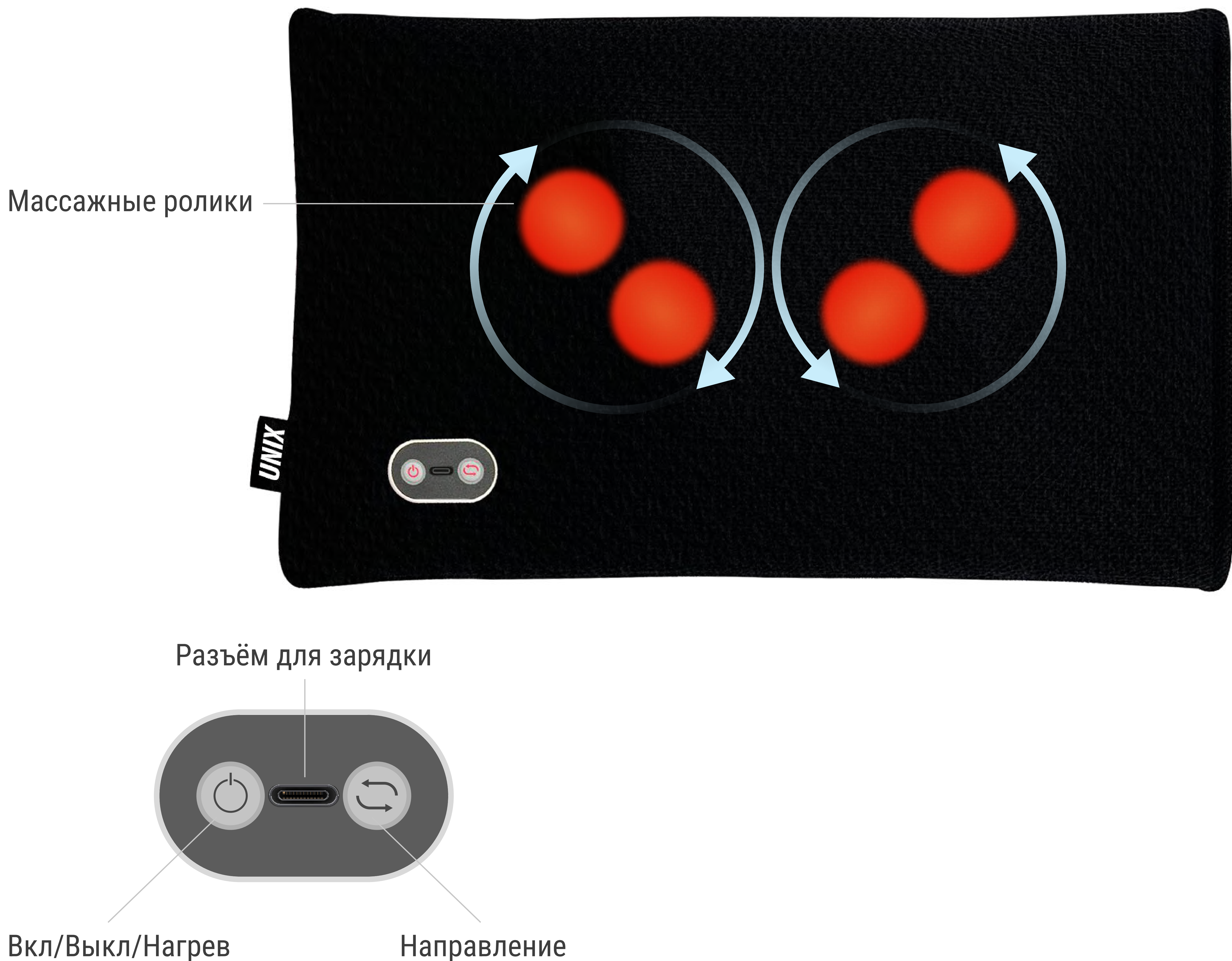

- Для запуска массажёра нажмите и удерживайте кнопку включения в течение трех секунд.
- Коротко нажмите на неё ещё раз, чтобы включить/отключить функцию подогрева.
- Нажмите и удерживайте кнопку направления для включения первого режима массажа.
- Нажмите на кнопку направления ещё один раз для включения второго режима массажа.
- Массажёр автоматически прекращает работу через 10 минут после включения.
- Если вы хотите продолжить использование устройства, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- При зарядке индикатор заряда горит красным светом.
- После подключения зарядного устройства дождитесь полной зарядки массажёра.
- При полной зарядке индикатор заряда горит зеленым светом.

- После полной зарядки необходимо вытащить штекер из разъёма, при этом следует взяться за штекер, а не тянуть провод.

Неисправности и методы их устранения

Проблема	Причина	Способ устранения
Звуки ударов или гул при работе	Нормальное явление	Нормальное явление
Шум при выполнении массажа	Если продолжается в течение 30 минут	Отключить прибор и подождать 1 час
Высокая температура поверхности или длительное остывание	Перегрев	Отключить массажёр и дать ему остыть

При появлении запаха горелого материала, нагревании кабеля в процессе зарядки, самостоятельного отключения устройства прекратите использование массажёра во избежание поломки и несчастных случаев. Отключите питание, вытащите кабель питания из розетки и обратитесь к продавцу изделия.

ВАЖНО!

В случае возникновения неполадок обратитесь в магазин, в котором вы приобретали роликовый массажёр. Эксплуатация устройства с неполадками строго запрещена. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности, это может привести к полному выходу изделия из строя.

ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Массажная подушка должна храниться в сухом помещении, при положительных температурах.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация изделия проводится согласно Требованию при обращении с группой однородных отходов "Оборудование компьютерное, электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства".

**Удовольствие
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU