


МАССАЖНОЕ КРЕСЛО UNIX MED ADORA

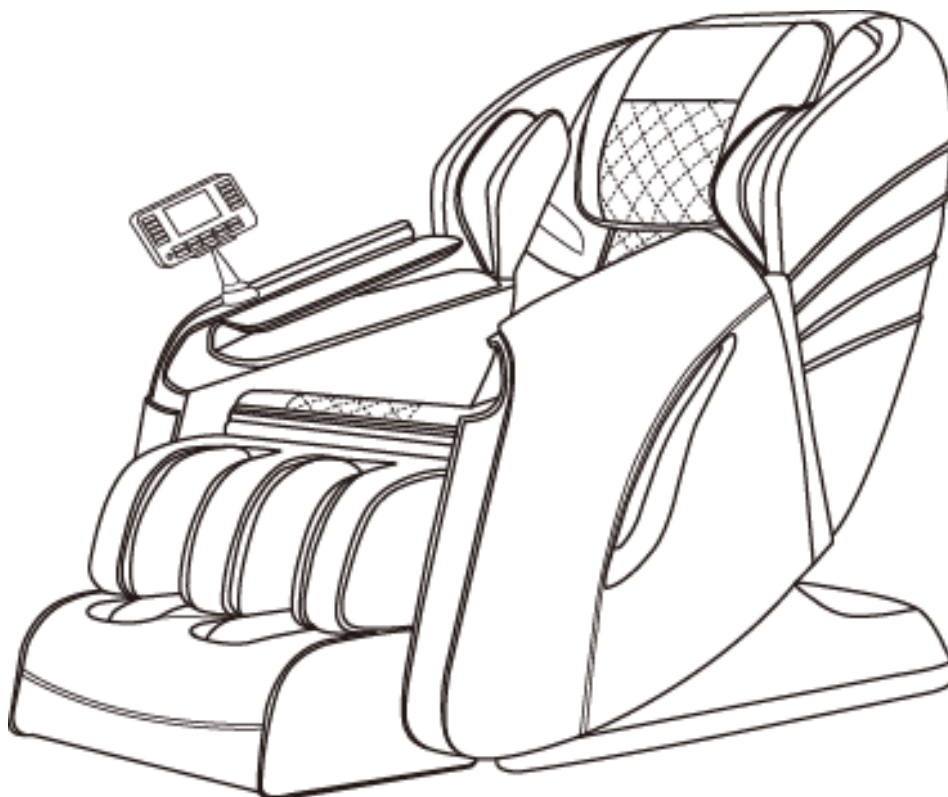

ВАЖНО

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Med!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукте нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Med** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием продукта! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Med заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярный массаж способствует улучшению вашего физического и ментального состояния, а также влияет на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Med** вы можете быть уверены в своем выборе на долгие годы.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все товары бренда **UNIX Med** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

Благодарим вас за покупку массажного кресла. Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство и ознакомьтесь с правильной техникой эксплуатации. Особое внимание обратите на меры предосторожности. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Примечание: Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия без предварительного уведомления. Фактические цвет и форма изделия могут отличаться от представленных на рисунках.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и обслуживание.....	1-3
Предупреждения.....	4
Схема устройства.....	5
Функции устройства.....	6
Функции компьютера.....	7
Функции кнопок.....	8
Инструкция по использованию.....	9-10
Технические характеристики.....	11

Меры предосторожности

1. Общие рекомендации по безопасности

- Не позволяйте детям приближаться к подвижным частям изделия;
- Используйте заземленный источник питания, соответствующий данному прибору;
- Во избежания повреждения оборудования и получения травм вынимайте вилку из розетки после использования или перед чисткой;
- Используйте прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве;
- Не используйте нерекондованные аксессуары и принадлежности;
- Не используйте прибор на открытом воздухе;
- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед началом использования;
- Запрещается использовать кресло для других целей, не указанных в данном руководстве;
- Рекомендуемое время использования составляет 20 минут;
- Не используйте этот прибор, если одна из защитных крышек сломана или повреждена;
- Не используйте этот прибор, если поврежден внешний корпус изделия;
- Не используйте никакие предметы для закрытия охлаждающих отверстий этого прибора;
- Не допускайте попадания мелких предметов во внутренние механизмы прибора;
- Не спите во время использования кресла;
- Не используйте этот прибор, если вы пьяны или плохо себя чувствуете;
- Не используйте этот прибор в течение часа после еды;
- Во избежание травм не применяйте чрезмерную силу при использовании данного прибора;
- Не используйте хрупкие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы, такие как мобильные телефоны и зажигалки, вблизи кресла.

2. Внешняя среда

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности;
- Не используйте прибор сразу же после резкого изменения температуры окружающей среды;
- Не используйте этот прибор в среде с сильной запыленностью или агрессивными газами;
- Не используйте этот прибор в тесных помещениях или местах с плохой циркуляцией воздуха;
- Нормальная рабочая температура - от 0 до 35°C;
- Нормальная относительная влажность воздуха - от 20% до 80%, не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной комнате);
- Не используйте прибор на открытом воздухе;
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей;
- Не устанавливайте кресло вблизи источников тепла (например, сбоку от плиты, на выходе воздуха из кондиционера);
- Не используйте этот прибор во время грозы;
- Не используйте этот прибор в местах с повышенной запыленностью.

3. Данный прибор не может использоваться следующими категориями лиц:

- Пациенты с остеопорозом; с проблемами сердца, а также те, кто носит электронные медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы;
- Лица с повышенной температурой тела;
- Беременные или менструирующие женщины;
- Люди, получившие физическую травму или повреждения кожи;
- Детям до 14 лет и лицам, находящимся в бессознательном состоянии, запрещается пользоваться этим изделием без присмотра;
- Лица, имеющие противопоказания врача в силу физической нестабильности и плохого самочувствия;
- Не пользуйтесь этим прибором, если поверхность вашего тела влажная;
- Лица, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании прибора.

4. Особые замечания по безопасности

- Убедитесь, что входное напряжение соответствует техническим характеристикам изделия;
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора во избежание поражения электрическим током или повреждения прибора;
- Не тяните за шнур питания, когда вставляете или вынимаете вилку из розетки;
- Не повреждайте провода и не пытайтесь изменить схему подключения данного прибора;
- Не используйте влажную ткань для очистки компонентов, находящихся под напряжением, таких как выключатель питания и вилка данного прибора;
- В случае отключения электроэнергии следует отключить прибор, чтобы избежать травм при внезапном возобновлении подачи электроэнергии;
- Если в процессе использования вы обнаружите, что кресло работает ненормально, немедленно прекратите его использование и обратитесь за консультацией к компании-продавцу;
- Если вы почувствуете недомогание во время использования этого прибора, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом;
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, психологическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим риски. Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание массажного кресла не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, во избежание травмы его замену должны производить специалисты компании-производителя, ее отдела технического обслуживания или аналогичного структурного подразделения.

5. Обслуживание устройства

- Данное изделие может подлежать ремонту только в сервисном центре, указанном производителем; пользователи не должны самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.
- Пожалуйста, выключайте питание каждый раз после использования.
- Не используйте этот прибор, если розетка ненадежно закреплена.
- Сматывайте шнур питания прибора, если он не используется в течение длительного времени, и храните его в сухом и чистом месте.

- Не храните изделие при высокой температуре или вблизи огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Для очистки используйте сухую ткань, не используйте растворители, бензин или спирт.
- Механизм работы изделия специально разработан таким образом, чтобы не требовать постоянного специального обслуживания;
- Не протыкайте мягкие элементы прибора острыми предметами;
- Не пытайтесь катить или тащить кресло по неровной поверхности, его необходимо поднимать и переносить;
- Не допускайте длительной работы изделия без перерыва. Периодически останавливайте прибор и оставляйте его выключенным на некоторое время.

6. Устранение неполадок

- Звук двигателя во время работы: это нормальное явление;
- Неисправность контроллера: Проверьте соответствие вилки питания и розетки; проверьте, включен ли переключатель питания;
- Прибор остановил работу: По истечении расчетного времени прибор автоматически выключается; если прибор работает слишком долго, срабатывает защитный переключатель температурного контроля, позволяя прибору остыть в течение получаса перед следующим использованием.


7. Условия хранения

- Храните изделие в помещении при температуре $-5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$;
- Обеспечьте относительную влажность от 20% до 80%, отсутствие агрессивных газов и хорошую вентиляцию в помещении.

Предупреждения

⚠ Внимание!

Избегайте прикладывания чрезмерных усилий при поднятии массажного кресла, чтобы предотвратить повреждение изделия или получение травм.

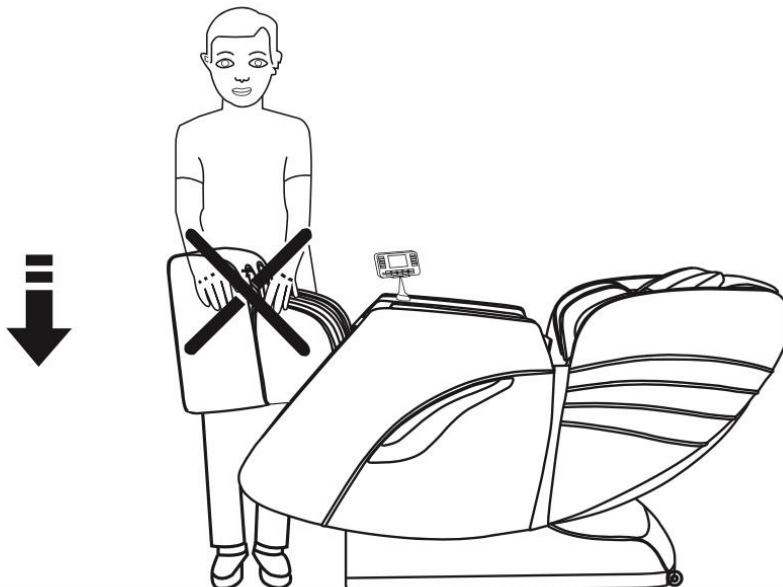


⚠ Внимание!

Прежде чем сесть на массажное кресло, убедитесь, что массажный манипулятор находится в вертикальном положении, чтобы избежать дискомфорта в области ягодиц и повреждения массажного манипулятора.



Схема устройства

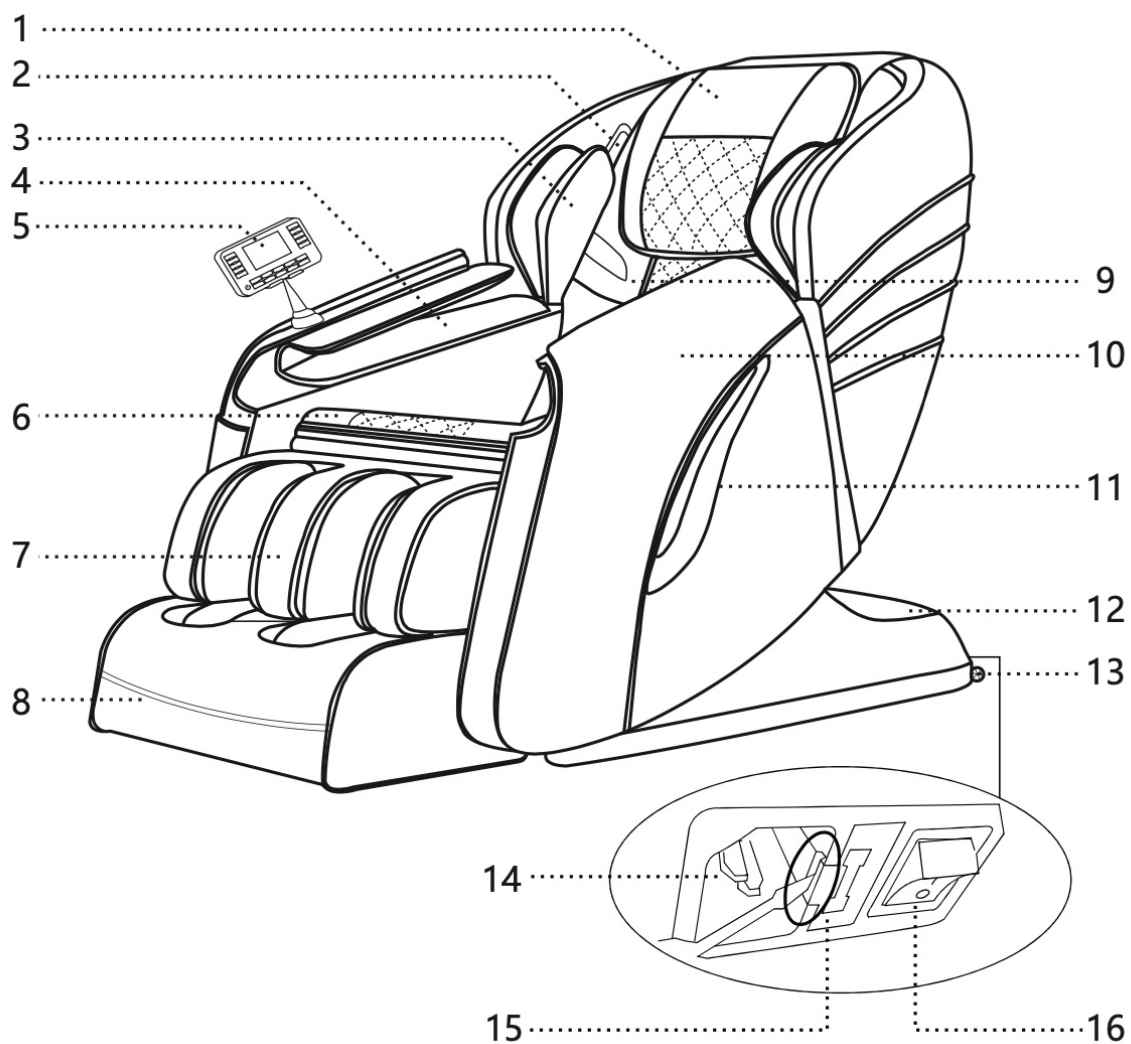


- | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Подголовник | 2. 3D-аудиодинамик | 3. Массажер для плеч |
| 4. Массажер для рук | 5. Компьютер | 6. Сиденье |
| 7. Массажер для голеней | 8. Валик для ног | 9. Спинка |
| 10. Подлокотник | 11. Декоративный элемент | 12. Задняя крышка |
| 13. Колесики | 14. Кабель питания | 15. Предохранитель |
| 16. Переключатель питания | | |

Функции устройства

- Прибор оснащен системой 2D манипуляторов, которые могут двигаться вверх и вниз, выдвигаться вперед и назад и имеют бесшумный ход.
- Модель оснащена функцией автоматического обнаружения и точной настройки положения плеч; автоматическое обнаружение изгибов человеческого тела и массажных акупунктурных точек, автоматического регулирования переднего и заднего расширения манипулятора в соответствии с обнаруженными изгибами человеческого тела и массажными акупунктурными точками, что делает массаж более естественным и эффективным.
- Прибор имеет ряд автоматических массажных программ: Мастер-массаж, Массаж для королевы, Массаж для плеч, Забота о спине и Спокойный сон.
- Специальный манипулятор предназначен для выбора одного из пяти ручных режимов массажа, включая массаж фиксированной точки, верхней части спины, нижней части спины, локальный и полный массаж.
- Функции ручного массажа: остановка, разминание, постукивание, растирание, акупрессура, перкуссия и еще 8 техник массажа на выбор.
- Прибор имеет функцию регулировки интенсивности, включая регулировку интенсивности 2D массажа на 3 уровнях, интенсивности давления воздуха на 3 уровнях и времени на 3 уровнях.
- Оснащен функцией аэромассажа верхней части тела: функция аэромассажа ладоней (4 воздушных массажера), функция аэромассажа плеч (4 воздушных массажера), функция аэромассажа рук (4 воздушных массажера) + 3 уровня интенсивности давления воздуха.
- Массажное кресло оснащено функцией аэромассажа нижней части тела: функция аэромассажа икр (12 воздушных массажеров) + 3 уровня интенсивности давления воздуха.
- В каркасе спинки используется технология "скользящего рельса", благодаря чему спинка может находиться на расстоянии всего 8 см от стены, что позволяет максимально сэкономить пространство.
- В каркасе спинки также используется технология "изогнутого рельса", которая полностью повторяет изгиб человеческой спины, позволяя пользователю наслаждаться массажем от головы до ног.
- Воздушные массажеры для левой и правой ладони оснащены функциями ударного массажа.
- Прибор имеет функцию подогрева спины: для этого используется источник дальнего инфракрасного тепла.
- Аудиосистема включает в себя 3D-аудиодинамики с левой и правой стороны кресла.
- Функция Bluetooth может быть использована для беспроводного подключения и воспроизведения музыки с внешнего устройства.
- Кресло оснащено функцией регулировки подъема голени, подъем спинки, а также функцией автоматической регулировки угла наклона кресла в режиме Zero Gravity.
- Функция роликового массажа ступней предусматривает три комплекта валиков, которые массируют пальцы и ступни ног, а также своды ступней; скорость регулируется тремя положениями.
- Подставка для голени оснащена функцией телескопической регулировки, высота подножки определяется в зависимости от длины ноги пользователя.
- Имеется функция автоматического выключения при отключении от сети, функция автоматического перезапуска массажной программы.
- Настройка массажеров осуществляется с помощью компьютера с большим экраном.

Функции компьютера

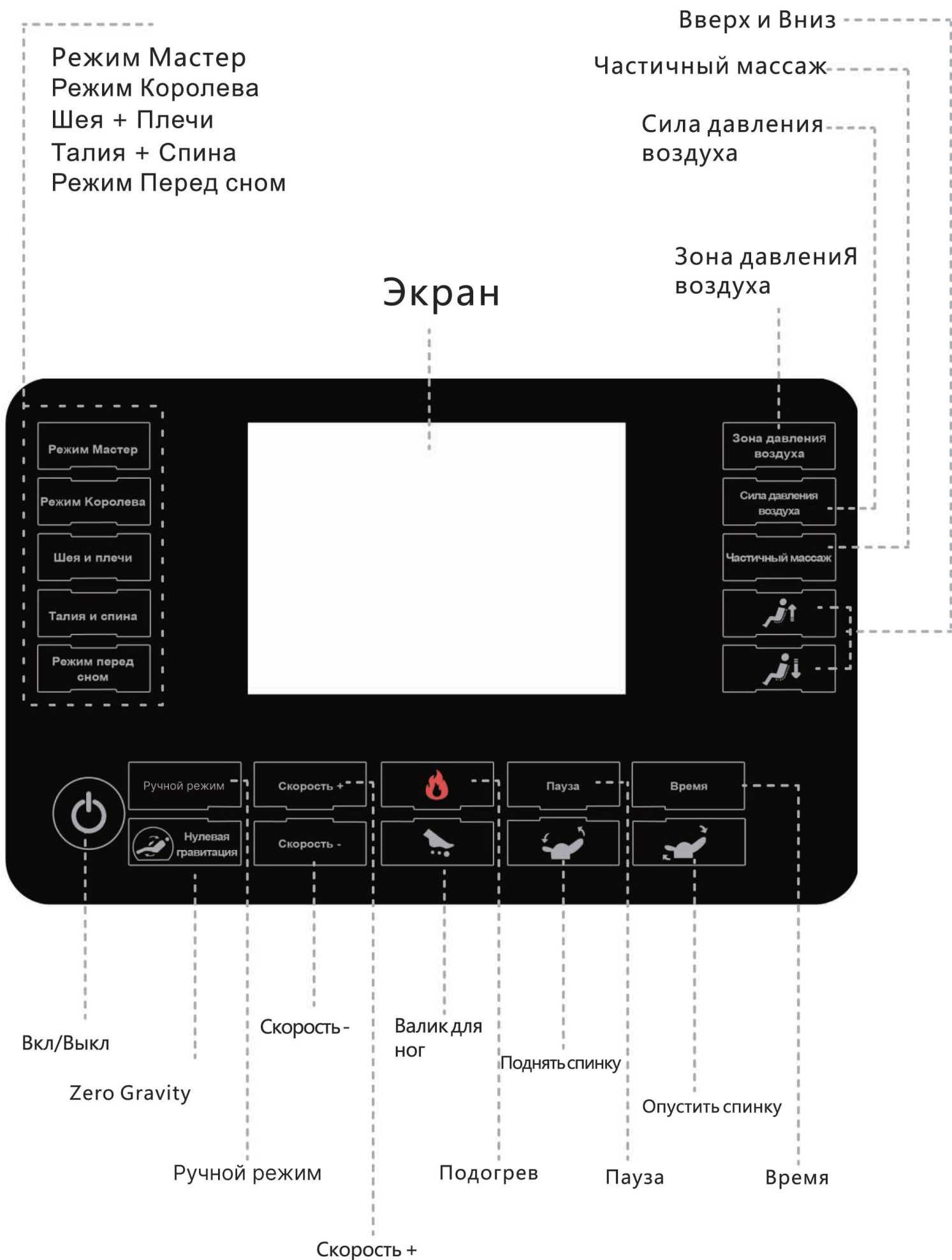

Функции кнопок

Начало работы

Кнопка режима ожидания: Нажмите кнопку "  ", чтобы включить/выключить функцию массажа всеми элементами кресла.


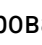
Когда питание включено, нажмите эту кнопку, чтобы перевести кресло в исходное положение. После этого по умолчанию будет запущена первая автоматическая программа "Мастер-массаж". Время работы по умолчанию составляет 20 минут. Нажмите эту кнопку еще раз и подождите еще 20 секунд для отмены запуска программы.

Автоматический режим


Автоматическая программа массажа: В зависимости от состояния вашего тела и времени массажа, вы можете выбрать "Мастер-массаж", "Массаж для Королевы", "Шея + Плечи", "Талия + Спина" и "Режим "Перед сном", каждый из которых представляет собой самостоятельную программу для целенаправленного массажа. (Подробное описание см. на экране компьютера).

Ручной режим

Активация режима: Нажмите кнопку "Ручной режим", чтобы выбрать один из 6 программ массажа.

Регулировка положения: В ручном режиме нажмите кнопку "  ", чтобы отрегулировать положение верхнего манипулятора, и "  ", чтобы отрегулировать положение нижнего манипулятора.

Другое


Подогрев: Нажмите кнопку "  ", чтобы включить или выключить функцию подогрева поясницы. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить подсветку, и снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить подсветку.

Валик для ног: Нажмите кнопку "  ", чтобы включить или выключить валик для ног.

Установка времени: Нажмите кнопку "Время", чтобы выбрать время массажа (10/20/30 минут).

Пауза: Нажмите кнопку "Пауза", чтобы приостановить массажную программу.

Режим Zero gravity: Нажмите кнопку "Zero Gravity" для включения/выключения режима.



Нажмите и удерживайте кнопку "  ", чтобы поднять спинку кресла. Нажмите и

удерживайте кнопку "  ", чтобы опустить спинку.

Зона давления воздуха: Нажмите кнопку «Зона давления воздуха», чтобы выбрать зону для аэромассажа (руки, плечи, голени и пр.).

Сила давления воздуха: Нажмите кнопку «Сила давления воздуха», чтобы выбрать один из трех уровней интенсивности

Частичный массаж: Нажмите кнопку «Частичный массаж», чтобы выбрать отдельные участки для массажа, например, шею, плечи, спину, талию, ягодицы, бедра и др.

Высота плеч: После того, как вы сели в кресло и включили его, вы услышите звуковой сигнал. Нажмите кнопку "  ", чтобы поднять манипуляторы в зоне плеч, или нажмите кнопку "  ", чтобы опустить манипуляторы в соответствии с вашим ростом.

Регулировка скорости: Нажмите кнопку "Скорость+", чтобы увеличить скорость массажа, и нажмите кнопку "Скорость-", чтобы уменьшить скорость массажа.

Инструкция по использованию


1. Подключение по Bluetooth и воспроизведение аудио

(1) Bluetooth включается по умолчанию при включении устройства или с помощью голосовых команд;


(2) Включите функцию Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке устройств массажное кресло, введите пароль 8888. После подключения, начните воспроизведение музыки на своем смартфоне.

2. Снятие подлокотников

Если массажное кресло не удастся занести в комнату из-за недостаточно широкого дверного проема, необходимо демонтировать подлокотник и занести его отдельно.

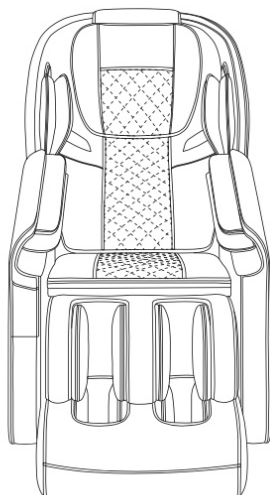





1. Открутите шестигранные винты с обеих сторон корпуса
2. Отсоедините разъем динамика

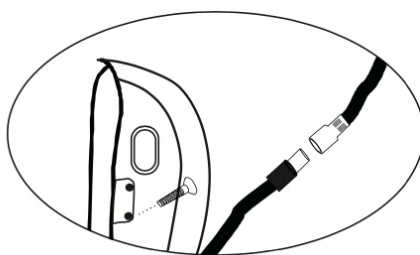

1. Соедините воздуховоды одного цвета, как показано на рисунке 1.


2. Наденьте желобки, как показано на рисунке 2, чтобы избежать искривления воздуховодов.

3. Затяните с помощью отвертки, как показано на рисунке 3.

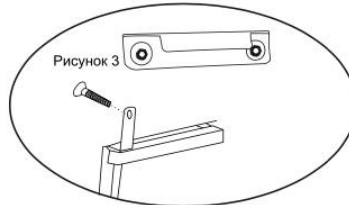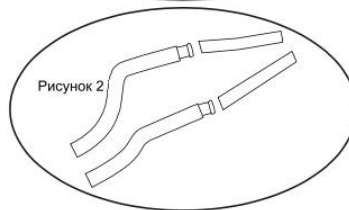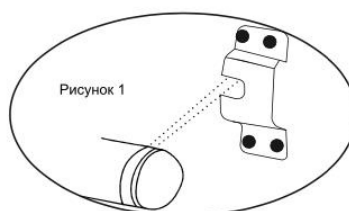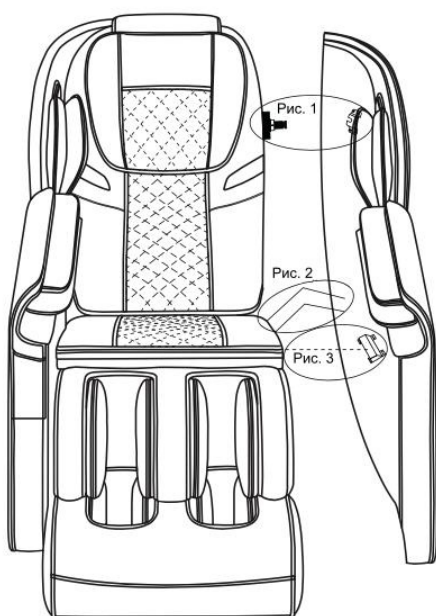

Перемещение массажного кресла

Убедившись, что кабель питания массажного кресла отключен от сети, наклоните спинку до определенного угла (при этом центр тяжести перенесется на колесики) и аккуратно толкайте кресло вперед, чтобы переместить его в нужное место. После этого опустите кресло до нормального положения. (Примечание: прежде чем отсоединять кабель питания, не забудьте нажать переключатель питания на компьютере).

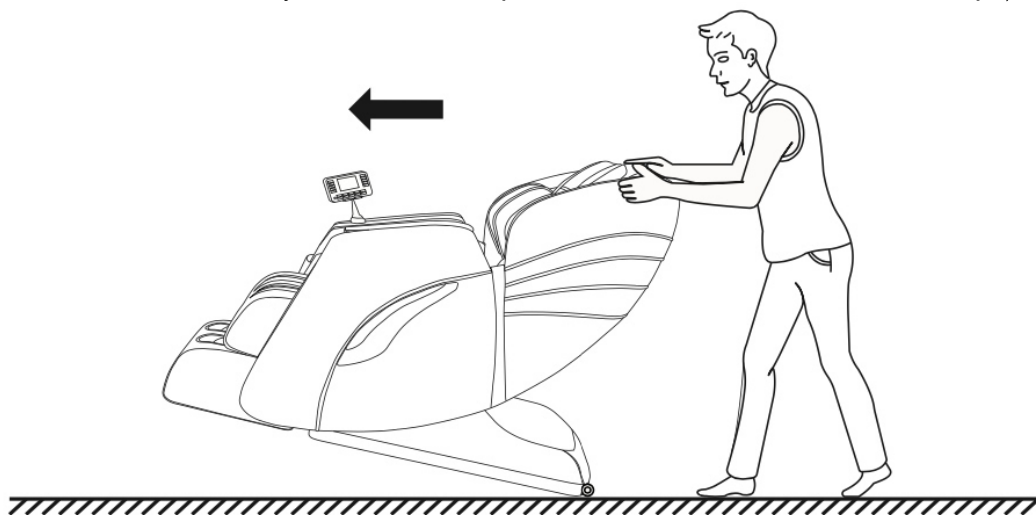

Внимание!

Транспортировочные колесики кресла предназначены для его перемещения на короткие расстояния с низкой скоростью. Для перемещения прибора на большие расстояния, пожалуйста, используйте вспомогательные средства.

Технические характеристики

Название	Массажное кресло
Модель	Массажное кресло UNIX Med Adora
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	120 Вт
Номинальное время работы	15-30 мин

**Отдыхайте
вместе с *UNIX* *MED***

