

**Отдыхайте
вместе с **UNIX MED****



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО UNIX MED AVOLA GREY



ВАЖНО Перед использованием устройства внимательно прочтайте инструкцию. Сохраните настоящеe руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Med!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукте нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Med** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием продукта! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Med заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярный массаж способствует улучшению вашего физического и ментального состояния, а также влияет на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Med** вы можете быть уверены в своем выборе на долгие годы.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все товары бренда **UNIX Med** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



UNIXFIT.RU

Уважаемые пользователи:

Приветствуем Вас и благодарим за покупку нашего массажного кресла. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию и обратите особое внимание на вопросы безопасности, чтобы обеспечить надлежащую его эксплуатацию.

Данное руководство предоставляет пользователям безопасные и эффективные методы эксплуатации. Пожалуйста, содержите его должным образом после прочтения для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

1. Лица, которым запрещено использование данного кресла:



- Запрещено использовать этот продукт пациентам с тромбозом, злокачественными опухолями, заболеваниями сердца, остеопорозом, беременным женщинам, а так же лицам с эпилепсией.

2. Указания по применению



- Пожалуйста, не стойте и не оказывайте чрезмерного давления на кресло, это приведет к замедлению работы двигателя и его остановки, что может привести к повреждению оборудования.
- Не снимайте защитный тканевый чехол со спинки массажного кресла перед использованием.
- Не используйте на местах, где есть травмы или воспаления.
- После массажа, пожалуйста, выпейте 500 мл кипяченой воды или горячего чая, чтобы ускорить обмен веществ.
- Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными недостатками или не имеющими соответствующего опыта и знаний, за исключением случаев, когда кто-либо, ответственный за их безопасность, контролирует или направляет их.
- Следует заботиться о детях, чтобы они не играли с креслом. Изделие оснащено нагревающейся поверхностью, и люди, не чувствительные к теплу, должны обращать на это внимание при его использовании.



- Запрещается использовать при обнаружении поломок на корпусе кресла или ткани.
- Категорически запрещается вставлять пальцы во вращающейся элементы массажера, чтобы избежать травм при защемлении.

 Не разбирать	<ul style="list-style-type: none"> Не перегружайте внутренние компоненты изделия, чтобы избежать возможного выхода машины из строя. Ни в коем случае нельзя разбирать, ремонтировать или модифицировать кресло самостоятельно. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, своевременно свяжитесь с дистрибутором.
 Выньте вилку	<ul style="list-style-type: none"> Во время технического обслуживания, пожалуйста, выньте вилку питания из розетки. Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения током и травм; Если массажное кресло не используется, пожалуйста, выньте вилку питания из розетки. При отключении питания в сети, пожалуйста, незамедлительно отключите источник питания и выньте вилку из розетки.

3 Про вилки, шнуры питания и линии электропередач

 Осторожно	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте источники питания, отличные от номинального напряжения, во избежание возгорания или повреждения изделий. При отсоединении шнурка питания следует держаться за вилку шнурка питания, а не за сам шнур питания. Если шнур питания поврежден, его необходимо приобрести у продавца или в отделе технического обслуживания.
---	--

4 Окружающая среда

 Осторожно	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте данное изделие во влажной или запыленной среде, чтобы избежать поражения электрическим током или поломки кресла. Не ставьте изделие рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами. Не используйте во время грома и молний.
---	--

Характеристики

Название	Массажное кресло UNIX Med Avola		
Мощность	36Вт	Таймер	15 минут
Напряжение	24В		

Пульт управления



Инструкция по эксплуатации

Кнопка питания: В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию массажа, повторное нажатие выключит все работающие функции.

Выбор зоны массажа: Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим ограниченной зоны массажа, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Массаж всей спины: нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж всего тела, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Массаж шеи: нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж шеи, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Массаж нижней части спины: нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж поясницы, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Прогрев: нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию прогревания, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Автоматический режим: нажмите эту кнопку, чтобы включить автоматический режим, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Функция вибрации: нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию вибрации, для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Регулировка силы вибрации: в режиме вибрации нажмите эту кнопку для регулировки интенсивности, доступно 3 режима сила вибрации.

Расположение шеи: В режиме "массаж шеи" нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать направление движения вверх или вниз.

Направление роликов для спины: нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать направление движения по часовой или против стрелки в режиме массажа спины.

Увеличение силы массажа спины: нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность воздействия массажа талии и спины, доступно 6 уровней.

Уменьшение силы массажа спины: во время массажа поясницы и спины нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать и уменьшить силу массажа, доступно 6 уровней.

Увеличение силы массажа шеи: при массаже шеи нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать и увеличить силу массажа шеи, доступно 6 уровней. Уменьшение силы массажа шеи: при массаже шеи нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать и уменьшить силу массажа шеи, доступно 6 уровней.

Напоминание

1. Рекомендуемое время сеанса массажа - не более 30 минут за 1 раз.
2. Если вы почувствуете недомогание во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
3. Когда массажер не используется, убедитесь, что вилка питания вынута из розетки.
4. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры в течение длительного времени.

Чистка и уход

- Перед чисткой обязательно отключите кресло от источника питания.
- Не промывайте изделие водой и не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь изделия.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства, такие как бензол или разбавитель, в противном случае это может вызвать изменение цвета или коррозию структуры изделия.
- Не гладьте утюгом ткань изделия.
- Если изделие намокнет, не разбрайте тканевую часть изделия, дайте изделию высохнуть естественным путем.

Возможные проблемы и их решения

Если у вас возникли проблемы при использовании этого продукта, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами и возможными решениями. Если устройство по-прежнему неисправно или им невозможно пользоваться, пожалуйста, отключите источник питания, выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр компании продавца.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не работает	<ul style="list-style-type: none">● Отсутствие питания в сети● Тумблер питания выключен● Не правильно подключена вилка в сеть	<ul style="list-style-type: none">● Дождитесь подачи питания в сеть● Переключите тумблер питания в ВКЛ● Плотно воткните вилку в розетку
Внезапная остановка во время массажа	<ul style="list-style-type: none">● Вилка выткнута из розетки● Автоматический таймер сеанса● Сработала защита от перегрева	<ul style="list-style-type: none">● Переподключите вилку● Нажмите кнопку питания ещё раз● Отключите питание и оставьте остыть на 30 минут.


♦ Массажное кресло обладает защитой от перегрева. Если массаж не синхронный, это нормально. Если наблюдаются проблемы во время использования, пожалуйста, используйте кресло после восстановления температурного режима.

Послепродажное обслуживание

Клиенты с гарантийными талонами могут пользоваться годичным гарантийным обслуживанием следующим образом:

1. Кресло можно заменить в течение одной недели после продажи, а гарантия будет бесплатной, если возникнут какие-либо проблемы с качеством в течение одного года, за исключением: Проблемы, вызванные самовосстановлением, техногенными повреждениями, стихийными бедствиями и форс-мажорными обстоятельствами.
2. Пожизненное техническое обслуживание. По истечении гарантийного срока в один год, взимается оплата только за стоимость запасных частей.

Этапы установки кресла-качалки

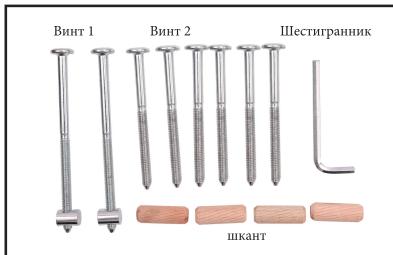

① Вытащите детали для монтажа



② Вставьте винт в отверстие для винта с внешней стороны подлокотника массажного кресла



③ Затяните винт



④ Вставьте два деревянных шанта в горизонтальную пластину и выкрутите винты на горизонтальной пластине.



⑤ Совместите выкрученный винт из пластины с соответствующим отверстием для винта и снова затяните его.



⑥ Установка с другой стороны кресла-качалки аналогична шагам ② ③ ④ ⑤
Поздравляем! На этом сборка окончена.