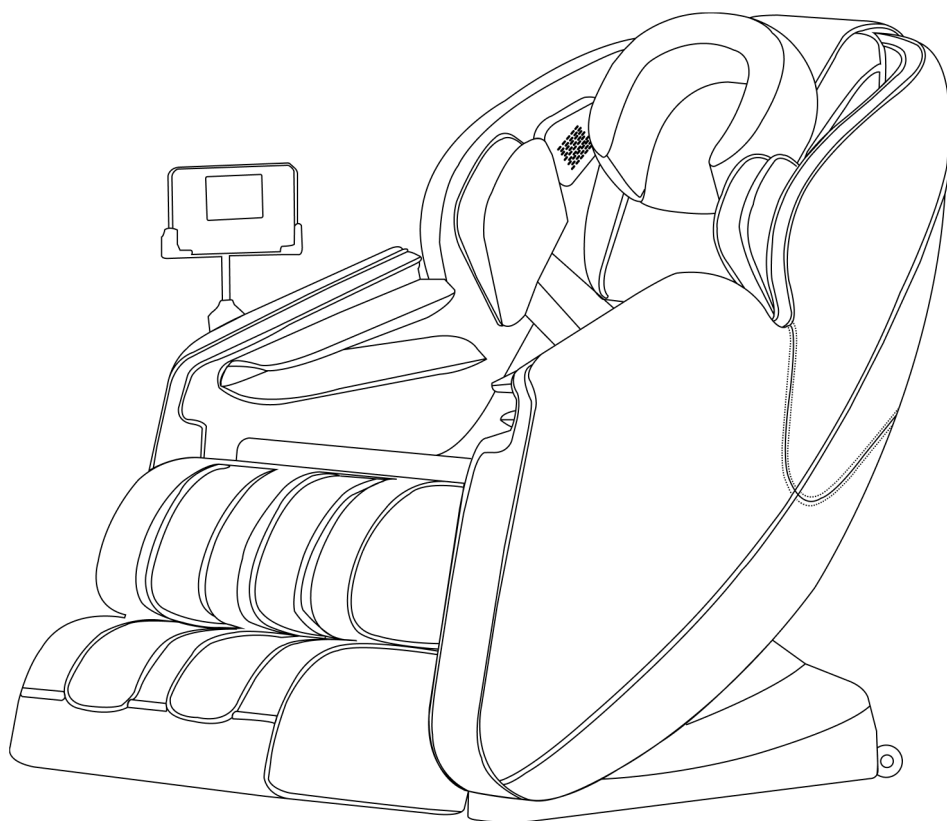


МАССАЖНОЕ КРЕСЛО UNIX MED AMELIA GREY

**ВАЖНО**

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Благодарим вас за покупку массажного кресла. Перед использованием массажного кресла ознакомьтесь с содержанием данного руководства по эксплуатации и обращайтесь к нему при необходимости.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и обслуживание.....	1
Функции и преимущества.....	2
Схема устройства.....	3
Инструкция по сборке.....	4
Инструкция по использованию.....	5
Устранение неполадок.....	7
Технические характеристики.....	9

Меры предосторожности

- Не используйте изделие с неподходящим напряжением.
- Обязательно используйте вилку с соответствующей розеткой.
- Используйте изделие в соответствии с руководством по эксплуатации; пожалуйста, не используйте устройство на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, дефектами органов чувств и нервной системы или отсутствием здравого смысла и жизненного опыта (включая детей). Не разрешайте детям играть с изделием или вблизи него, не оставляйте детей без присмотра рядом с изделием.
- Если кабель питания поврежден, во избежание поломок и травм его замену должен производить профессиональный специалист компании-производителя, отдела технического обслуживания или аналогичного структурного подразделения.

Замечания по безопасности

- Убедитесь, что входное напряжение соответствует техническим характеристикам изделия.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Никогда не используйте влажную ткань для чистки выключателя питания, вилки и других частей изделия, находящихся под напряжением.
- Если в процессе использования вы обнаружите, что кресло работает ненормально, немедленно прекратите его использование и обратитесь за консультацией к компании-продавцу.

Данный прибор не может использоваться следующими категориями лиц:

- Пациенты с остеопорозом; с проблемами сердца, а также те, кто носит электронные медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы;
- Беременные или менструирующие женщины;
- Люди, получившие физическую травму или повреждения кожи.
- Лица, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании прибора.
- Лица, имеющие противопоказания врача в силу физической нестабильности и плохого самочувствия

Внешние условия

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не используйте изделие в условиях резко меняющейся температуры.

Обслуживание устройства

- Данное изделие может подлежать ремонту только в сервисном центре, указанном производителем; пользователи не должны самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.
- Пожалуйста, выключайте питание каждый раз после использования.
- Сматывайте шнур питания прибора, если он не используется в течение длительного времени, и храните его в сухом и чистом месте.
- Не храните изделие при высокой температуре или вблизи огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Для очистки используйте сухую ткань, не используйте растворители, бензин или спирт.
- Не допускайте длительной работы изделия без перерыва. Периодически останавливайте прибор и оставляйте его выключенным на некоторое время.


Основные функции

- L-образная форма позволяет массировать шею, плечи, спину, талию и другие части тела.
- Восемь нажимных массажных головок на спине
- Четыре автоматических режима массажа: Освежающий, Энергетический, Сон и SPA массаж.
- Воздушные подушки для массажа плеч, рук, икр и ступней.
- Постоянный подогрев области спины.
- Полуавтоматический режим работы.
- Роликовый массаж ног.
- Встроенный Bluetooth-адаптер для прослушивания музыки.

Преимущества

- Снимает общую усталость.
- Способствует циркуляции крови.
- Снимает мышечное напряжение.
- Облегчает мышечную боль.


Схема устройства

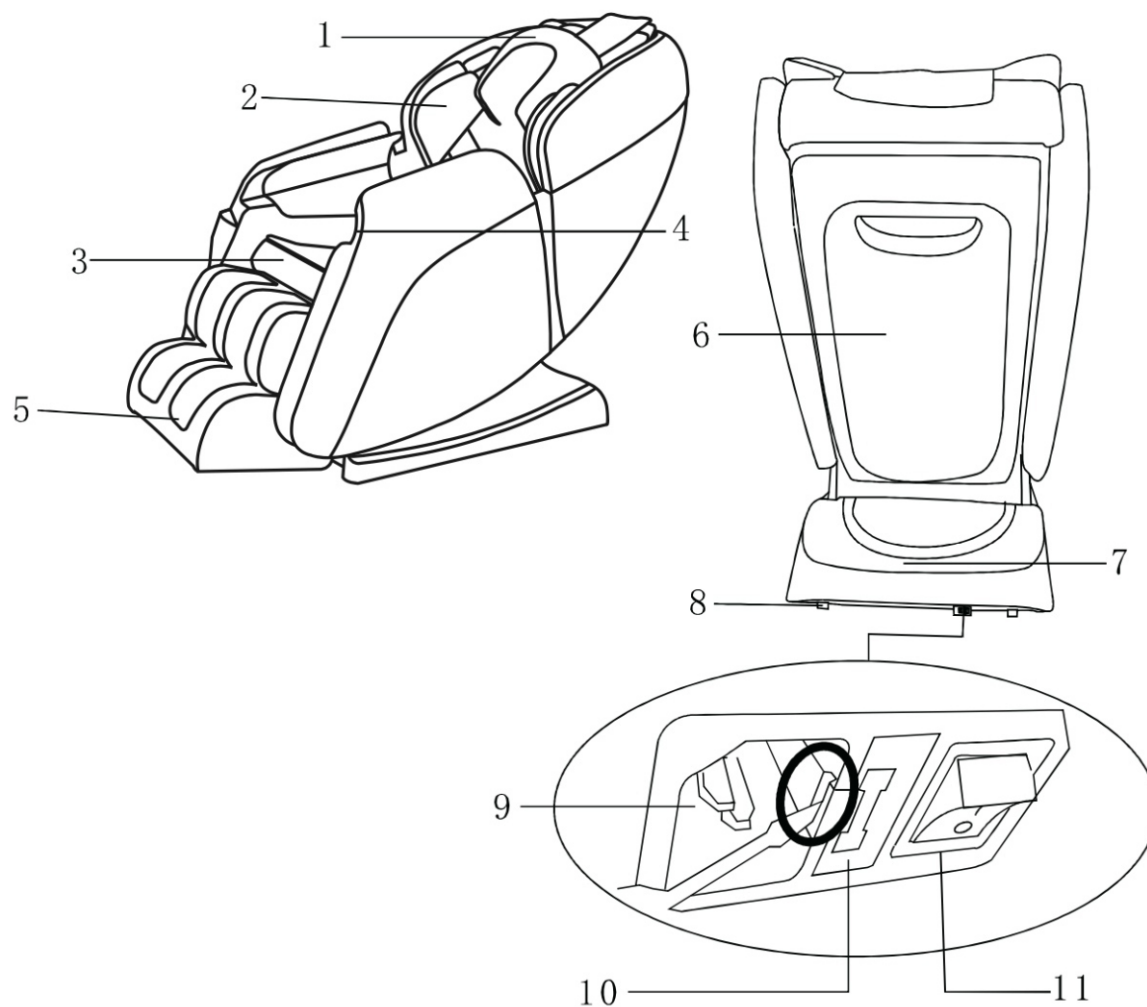


- 1.Подголовник
- 2.Плечевая подушка
- 3. Сиденье
- 4. Подлокотник
- 5. Подставка для ног
- 6. Спинка
- 7. Крышка платы управления
- 8. Валики
- 9. Разъем питания
- 10. Предохранитель
- 11. Выключатель питания

Инструкция по сборке

Если кресло не проходит через дверной проем, снимите боковую панель.

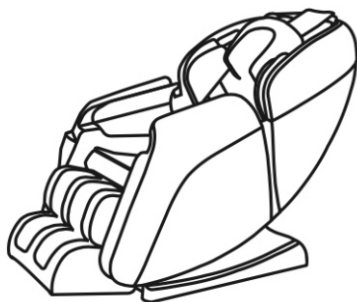


1. Открутите винт с внутренним шестигранником
2. Вытащите разъем динамика

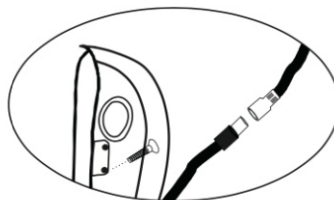

Установка и снятие подлокотников

Если массажное кресло не удастся занести в комнату из-за недостаточно широкого дверного проема, необходимо демонтировать подлокотник и занести его отдельно.

- Соедините воздуховоды одного цвета, как показано на рисунке 1.
- Наденьте желобки, как показано на рисунке 2, чтобы избежать искривления воздуховодов.
- Затяните с помощью отвертки, как показано на рисунке 3.

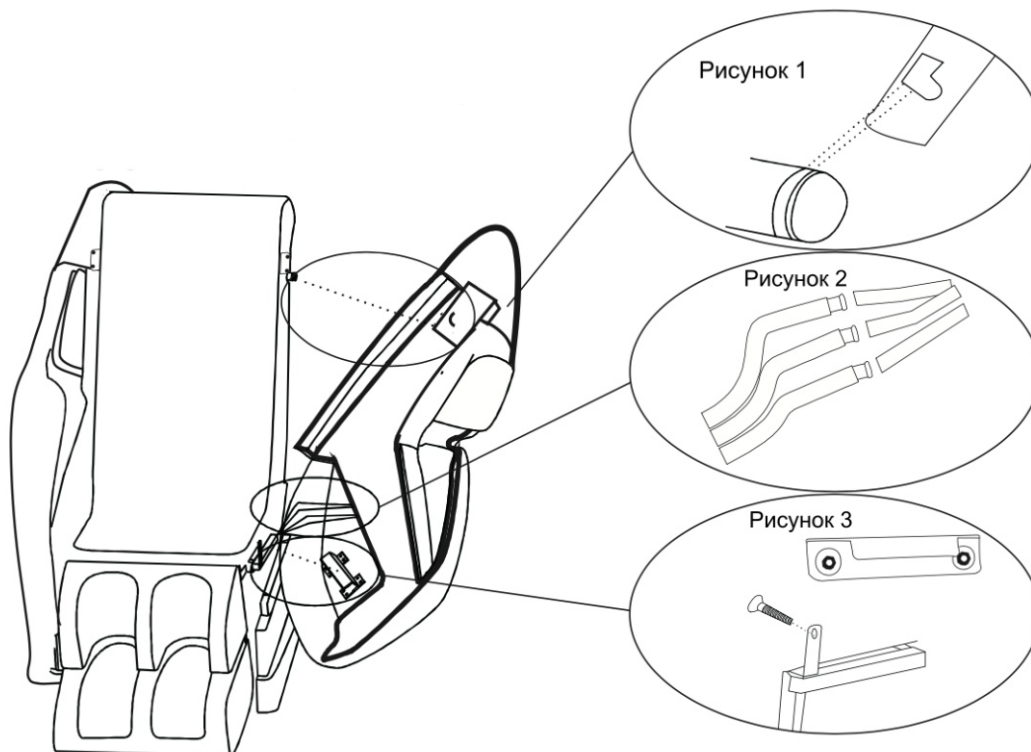

Перемещение массажного кресла


Наклоните массажное кресло назад примерно на 45° , используя колесики для движения вперед или назад.

Важно!

- Не передвигайте массажное кресло, когда на нем кто-то сидит.
- Во избежание повреждения напольного покрытия при перемещении массажного кресла лучше подложить под него защитный коврик.
- Во время перемещения кресла крепко держите его, чтобы не уронить.

Размещение массажного кресла

При размещении массажного кресла оставьте вокруг достаточно места, чтобы ноги и спина пользователя могли свободно двигаться вверх и вниз. Соответствующее пространство схематично изображено на рисунке ниже.

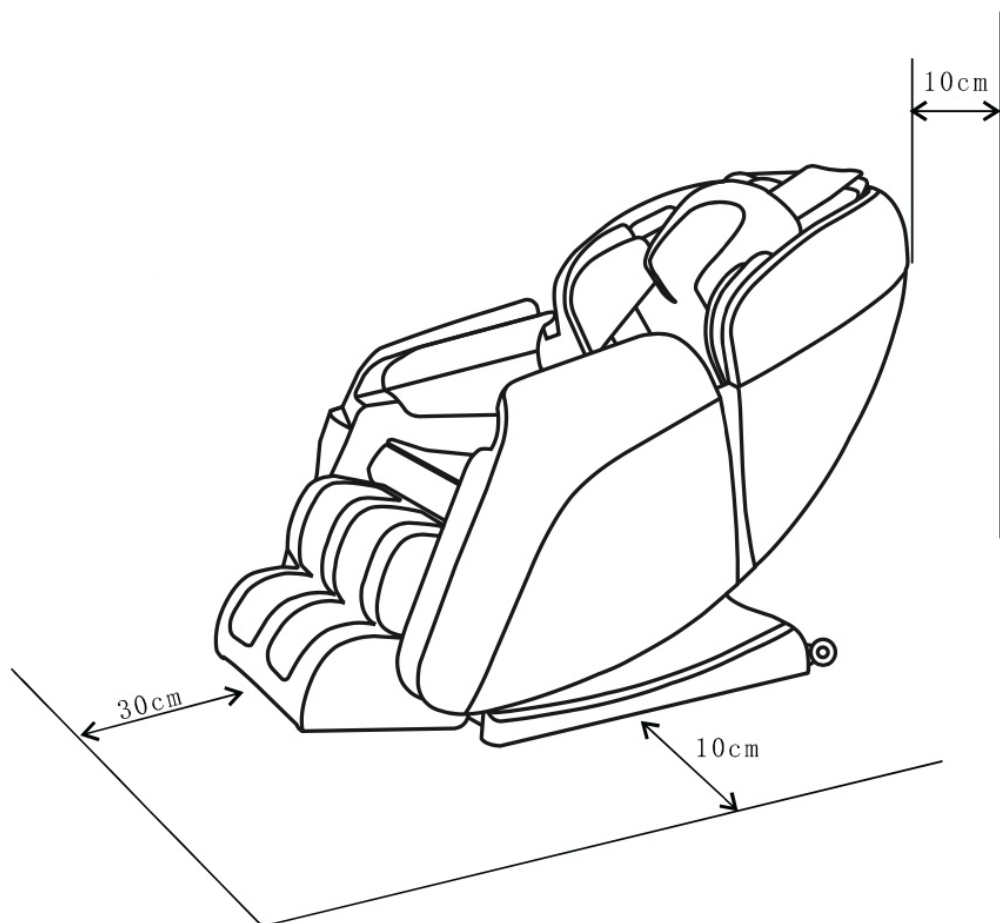


Инструкция по использованию

Функции кнопок:

Режим разминания
Режим Шиаци
Силовой режим
Расслабление мышц
Режим "Перед сном"

Автоматический аэромассаж
Аэромассаж плеч/головы
Аэромассаж рук
Аэромассаж ног
Интенсивность

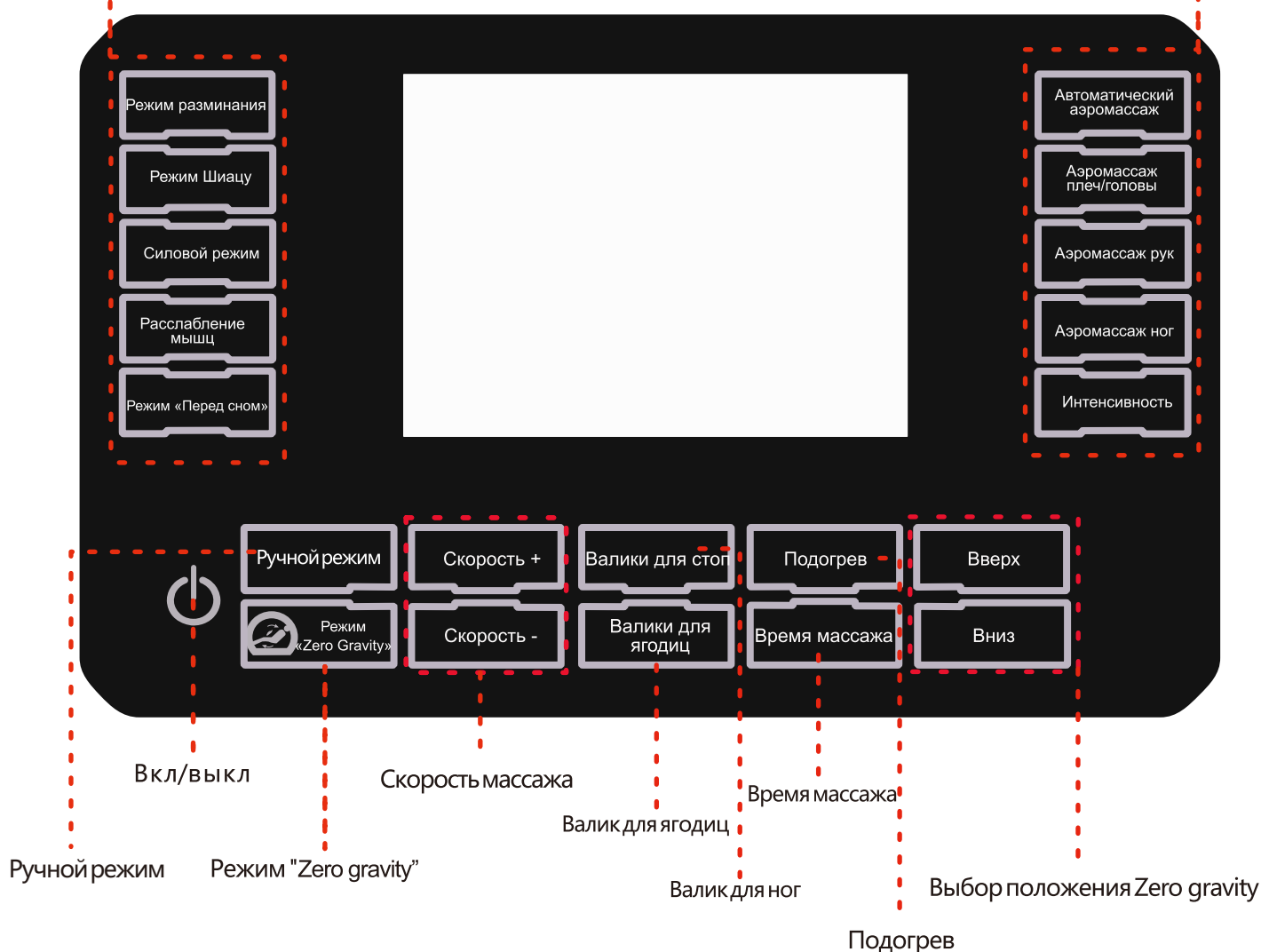

Включение/выключение

Найдите подходящую электрическую розетку (см. стр. 4) и подключите прибор к сети. Далее переведите переключатель в положение "I". Если индикатор загорится, это означает, что прибор подключен к сети.

Начало работы

Кнопка режима ожидания: Нажмите кнопку "⏻", чтобы включить/выключить функцию массажа всеми элементами кресла.

Когда питание включено, нажмите эту кнопку, чтобы перевести кресло в исходное положение. После этого по умолчанию будет запущена первая автоматическая программа "Релакс-массаж". Время работы по умолчанию составляет 15 минут. Нажмите эту кнопку еще раз и подождите еще 20 секунд для отмены запуска программы.

Автоматический режим

Автоматическая программа массажа: В зависимости от состояния вашего тела и времени массажа, вы можете выбрать "Режим разминания", "Режим Шиаци", "Силовой режим", "Режим расслабления мышц" и "Режим "Перед сном", каждый из которых представляет собой самостоятельную программу для целенаправленного массажа. (Подробное описание см. на экране компьютера).

Аэромассаж

Автоматический аэромассаж: Нажмите кнопку "Авто аэромассаж", чтобы включить или выключить программу автоматического аэромассажа.

Аэромассаж плеч и головы: Нажмите кнопку "Аэромассаж Плеч/Головы", чтобы включить или выключить программу аэромассажа плеч и головы.

Аэромассаж рук: Нажмите кнопку "Аэромассаж Рук", чтобы включить или выключить программу аэромассажа рук.

Аэромассаж ног: Нажмите кнопку "Аэромассаж Ног", чтобы включить или выключить программу аэромассажа ног.

Регулировка интенсивности: Нажмите кнопку "Сила аэромассажа" для регулировки интенсивности поступающего воздуха.

Ручной режим

Активация режима: Нажмите кнопку "Ручной режим", чтобы выбрать один из 3 программ массажа.

Регулировка скорости: Нажмите кнопку "Скорость+", чтобы увеличить скорость массажа, и "Скорость-", чтобы уменьшить скорость массажа.

Другое

Подогрев: Нажмите кнопку "Подогрев", чтобы включить или выключить функцию подогрева поясницы.

Валик для ног: Нажмите кнопку "Валик для ног", чтобы включить или выключить валик для ног.

Валик для ягодиц: Нажмите кнопку "Валик для ягодиц", чтобы включить или выключить валик для ягодиц.

Установка времени: Нажмите кнопку "Время", чтобы выбрать время массажа (15/20/25/30 минут).

Режим Zero gravity: Нажмите кнопку "Zero Gravity" для включения/выключения режима. Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх", чтобы поднять спинку кресла. Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз", чтобы опустить спинку.

Устранение неполадок

- Если при подключении к розетке массажное кресло не работает, проверьте, хорошо ли подключена вилка и включено ли питание.
- Если питание включено, но массажное кресло не работает, замените предохранитель (см. страницу 5 данной инструкции).
- Если массажное кресло внезапно перестало работать, возможно, закончилось время массажа, или вы случайно нажали кнопку выключения.
- При работе массажного кресла возникает шум мотора, и это вполне нормально.
- Если время истекло и массажное кресло перестало работать, нажмите кнопку включения/выключения, и оно запустится снова.
- Если индикатор питания мигает, но массажное кресло не включается, проверьте, исправна ли кнопка включения или в порядке ли гнездо пульта управления.
- Если во время массажа вы обнаружили неполадки, немедленно выключите питание. Не возобновляйте использование устройства до устранения проблем.

Важные замечания:

- При возникновении проблем в ходе использования массажного кресла попробуйте найти решение в данном руководстве. Если проблема трудноразрешима, отключите питание, выньте вилку из розетки и обратитесь за советом к продавцу или производителю.
- Никогда не разбирайте и не обслуживайте массажное кресло самостоятельно. Если массажное кресло будет повреждено в результате самостоятельного демонтажа или ремонта, гарантия будет аннулирована.

Технические характеристики

Название	Массажное кресло UNIX Med
Модель	Amelia
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100Вт
Стандарт безопасности	Класс I
Номинальное время работы	20 мин

**Отдыхайте
вместе с *UNIX* *MED***

